

# SKLOPIVA INVALIDSKA KOLICA



## UPUTE ZA KORIŠTENJE

Za reklamacije obratite se na:

Medical Direct d.o.o.  
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana  
Tel: +385 1 20 20 504  
E-mail: [prodaja@medicaldirect.hr](mailto:prodaja@medicaldirect.hr)  
Web: [www.medicaldirect.hr](http://www.medicaldirect.hr)

**SKU: MOBIL-TIM**

## 1. Konstrukcija

Kolica su izrađena od čeličnog okvira. Ima sklopive naslone za ruke koji olakšavaju sjedanje i izlazak osobama smanjene pokretljivosti. Opremljen stražnjim kotačima od 8" i prednjim kotačima od 6", ručnim kočnicama (stražnji kotači), sjedalom s naslonom, ručka za transport, sigurnosnim pojasom i osloncem za noge.

### Elementi kolica:



## 2. Namjena

Invalidska kolica su pomagalo za osobe koje imaju problema sa samostalnim kretanjem i za osobe s disfunkcijama i ograničenjima kretanja. Njima se može upravljati samo uz pomoć osobe u pratnji. Kolica imaju transportnu funkciju. Svrha im je olakšati kretanje korisnika. Osobito se preporučuje osobama s poteškoćama u kretanju uzrokovanim: paralizom, prekomjernom tjelesnom težinom, degeneracijom ili deformacijom udova, degeneracijom ili oštećenjem zglobova, oštećenjem ekstremiteta ili njihovim amputacijama, kardiovaskularnim bolestima, poremećajima krvne cirkulacije.

## 3. Montaža i uporaba


### RASKLAPANJE/SKLAPANJE KOLICA:

- Jednom rukom uhvatite okvir sjedala, a drugom okvir naslona, razvlačeći kolica dok se potpuno ne rasklope. Zatim zategnite sigurnosnu kopču na stražnjoj strani naslona. Spustite naslone za ruke i noge.
- Za sklapanje kolica, ponovite korake, počevši od preklapanja naslona za ruke i noge. Zatim otpočajete sigurnosnu kopču, uhvatite okvir naslona za leđa i sjedala i preklopite ih dok se potpuno ne sklope.


### ODMICANJE NASLONA ZA RUKE

- Lagano podignuti gore naslone za ruke.
- Ne koristite naslone za ruke kao potporu pri ustajanju. Ako je potrebno, treba pozvati nekoga u pomoć.

## KOČNICE

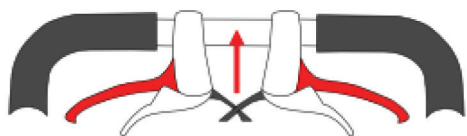

**Slika 1**

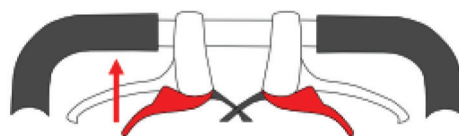

**Slika 2**

- Za blokiranje kotača, zategnite gornje ručke kočnice (Slika 1).
- Za otpuštanje pritisnite donje ručke kočnice (slika 2).
- Za kočenje pritisnite gornje ručke kočnice.

## OSLONCI ZA NOGE

- Ne koristite oslonac za noge kao potporu kod sjedanja ili silaženja iz kolica, jer se invalidska kolica mogu nagnuti i prevrnuti.

## SIGURNOSNA TRAKA

- Neophodno je vezati sigurnosnu traku tijekom uporabe kolica.

## SJEDANJE U INVALIDSKA KOLICA

- Prilikom sjedanja, silaska, mijenjanja položaja korisnika ili zaustavljanja, moraju se blokirati kočnice.
- Invalidska kolica treba postaviti što je moguće bliže točki transfera, tako da budu u kontaktu s krevetom ili drugim sjedalom koje se koristi. Ako se korisnik ne može samostalno prebaciti, treba ga prebaciti u invalidska kolica.
- U kolicima sjesti što dublje, na sredini sjedala, kako kolica ne bi izgubila stabilnost.

## RUČKA ZA TRANSPORT

- Kolica imaju ručku koja korisniku olakšava njihovo nošenje i transport.
- Prije prijevoza, sklopite kolica i uklonite ručku.

**PAŽNJA!** Nemojte izvlačiti ručku kada su kolica rasklopljena.

## 4. Tehnička specifikacija

Ukupna širina	51 cm
Unutarnja širina	41 cm
Ukupna dubina	80 cm
Visina sjedala u odnosu na tlo	46 cm
Ukupna visina	86 cm
Dimenzije sjedišta	41 x 41 cm
Težina	9,5 kg
Maksimalno opterećenje	136 kg
Boja okvira	bijela

## 5. Napomene i preporuke

**Timago International Group ne snosi odgovornost za nepravilno korištenje invalidskih kolica, nepoštivanje sigurnosnih pravila ili za korištenje suprotno namjeni.**

- Prije svake uporabe kolica provjerite rad kočnica, strukturu i stanje kotača. Ne koristite kolica ako se uoče kvarovi ili nedostaci.
- Kolica nemaju podesivu širinu, prije korištenja provjerite da li je širina kolica prikladna za korisnika.
- Invalidska kolica namijenjena su samo za kraće distance.

## **6. Održavanje**

Elemente kolica potrebno je redovito održavati:

- Sjedalo se može čistiti hladnom ili toplom vodom pomoću vlažne (ne mokre) krpe i bez upotrebe deterdženata. Teže mrlje treba očistiti spužvom.
- Plastične elemente čistiti vlažnom krpom.

## **7. Uvjeti skladištenja i transporta**

Proizvod ne smije biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti, djelovanju vode ili vlage.