

UNIVERZALNA OGRADA ZA KREKET



UPUTE ZA KORIŠTENJE

SKU: MP167

1. ŠIFRE

MP167 Univerzalna ograda za krevet

2. UVOD

Hvala vam što ste odabrali dodatak MOPEDIA tvrtke Moretti. Ove zaštitne ograde za krevet osmišljene su i izrađene kako bi zadovoljile sve vaše potrebe za praktičnom, pravilnom i sigurnom uporabom. Ovaj priručnik sadrži upute za pravilnu uporabu odabranog dodatka, kao i korisne savjete za vašu sigurnost. Prije uporabe zaštitnih ograda za krevet, pažljivo pročitajte cijeli priručnik.

OPREZ!

- Nemojte koristiti ovaj uređaj u svrhe koje nisu opisane u ovom priručniku.
- Tvrtka Moretti S.p.A. ne snosi odgovornost za štetu nastalu nepravilnom uporabom uređaja ili uporabom koja odstupa od one opisane u ovom priručniku.
- Zadržavamo pravo na izmjene uređaja i ovog priručnika bez prethodne najave, u svrhu poboljšanja karakteristika proizvoda.
- Uvijek obratite pozornost na pokretne dijelove koji bi mogli uzrokovati zaglavljivanje udova i ozljede.
- Uvijek vodite računa o prisutnosti djece.

3. NAMJENA

Sklopiva zaštitna ograda za krevet (polovične duljine) dodatak je osmišljen kako bi spriječio slučajan pad osobe s kreveta. Može poslužiti kao koristan oslonac koji olakšava podizanje iz kreveta i sjedenje na njega, a po želji se može postaviti na bilo koju stranu kreveta.

4. IZJAVA O SUKLADNOSTI

Moretti S.p.A. izjavljuje, pod svojom isključivom odgovornošću, da je proizvod koji proizvodi i stavlja na tržište tvrtka Moretti S.p.A., a koji pripada skupini KREKETI – TULIPANO, u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2017/745 o MEDICINSKIM PROIZVODIMA od 5. travnja 2017.

U tu svrhu, Moretti S.p.A. jamči i izjavljuje, pod svojom isključivom odgovornošću, sljedeće:

1. Proizvodi udovoljavaju zahtjevima za opću sigurnost i učinkovitost propisanim u Prilogu I. Uredbe 2017/745, u skladu s odredbama Priloga IV. navedene Uredbe.
2. Proizvodi NISU MJERNI INSTRUMENTI.
3. Proizvodi NISU NAMIJENJENI ZA KLINIČKA ISPITIVANJA.
4. Proizvodi su pakirani u NESTERILNA PAKIRANJA.
5. Proizvodi pripadaju I. klasi sukladno odredbama Priloga VIII. navedene Uredbe.
6. Moretti S.p.A. stavlja na raspolaganje nadležnim tijelima tehničku dokumentaciju kojom se dokazuje sukladnost s Uredbom 2017/745, i to najmanje 10 godina od proizvodnje posljednje serije.


Napomena: Potpuni kodovi proizvoda, registracijski broj proizvođača (SRN), UDI-DI kod te sve reference na primjenjive propise navedeni su u EU izvaji o sukladnosti koju Moretti S.p.A. izdaje i stavlja na raspolaganje putem svojih kanala.

5. OPĆA UPOZORENJA

- Za pravilnu uporabu uređaja pogledajte ovaj priručnik.
- Prije uporabe uređaja posavjetujte se sa svojim liječnikom ili terapeutom.
- Zapakirani proizvod držite podalje od izvora topline jer je ambalaža izrađena od kartona.
- Vijek trajanja dodatka određen je trošenjem dijelova koji se ne mogu popraviti i/ili zamijeniti.
- Uvijek obratite pozornost na prisutnost djece.
- Zaštitna ograda za krevet nije namijenjena podnošenju cjelokupne tjelesne težine osobe. Ovaj je proizvod namijenjen isključivo pružanju ravnoteže i potpore pri sjedenju i ustajanju.
- Korisnik i/ili pacijent dužni su prijaviti svaki ozbiljan incident povezan s uređajem proizvođaču i nadležnom tijelu države u kojoj korisnik i/ili pacijent boravi.

6. OPĆI OPIS

6.1 Popis dijelova

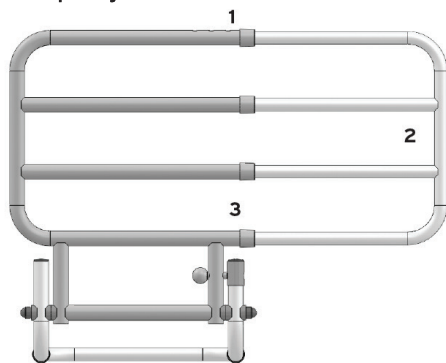


1. Gornja teleskopska ručka (1 kom.)
2. Okvir (1 kom.)
3. Spoj poprečnog elementa (1 kom.)

7. SASTAVLJANJE

7.1 Sastavljanje

1. Pomoću kočji umetnite spoj poprečnog elementa u glavni okvir.
2. Postavite teleskopske cijevi na okvir i prilagodite širinu zaštitne ograde za krevet.
3. Postavite sastavljeni okvir između madraca i okvira kreveta.

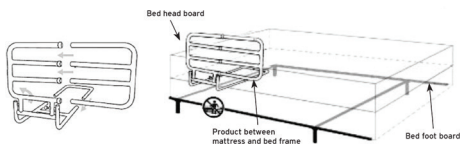

7.2 Rastavljanje

Slijedite gore opisani postupak obrnutim redoslijedom.

8. PRIJE UPORABE

- Uvijek provjerite istrošenost mehaničkih dijelova uređaja kako biste osigurali njegovu uporabu uz

potpunu sigurnost za osobe i imovinu.

- Ponovno provjerite je li uređaj ispravno sastavljen te obratite pozornost na pričvršćivanje bočnih ograda za okvir kreveta.

9. MJERE OPREZA PRI UPORABI

Sastavite uređaj prema uputama za uporabu, a širinu teleskopske zaštitne ograde prilagodite svojim potrebama pomoću kopči. Postavite zaštitnu ogradu između madraca i okvira kreveta.

Za podizanje i spuštanje zaštitne ograde koristite crni gumb. Povucite ga prema van kako biste oslobodili ogradu, a zatim je podignite ili spustite.

NAPOMENA: Uvijek provjerite je li zaštitna oграда u zaključanom položaju.

10. ČIŠĆENJE

10.1 Čišćenje


Koristite samo vlažnu krpu i blagi sapun. Nakon čišćenja, a prije ponovne uporabe, temeljito osušite.

10.2 Dezinfekcija

Ako je potrebna dezinfekcija proizvoda, koristite uobičajeno sredstvo za dezinfekciju.

NAPOMENA: Nikada nemojte koristiti kiseline, lužine ili otapala, poput acetona ili razrjeđivača.

11. TEHNIČKE ZNAČAJKE

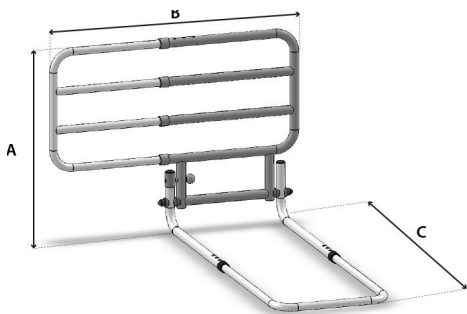

Dimenzije

A – Visina od okvira kreveta: 55 cm

B – Podesiva širina: od 66 do 71 cm

C – Podesiva dubina: od 83 do 88 cm

Tehničke specifikacije

- Okvir od eloksiranog aluminija
- Kada se ne koristi, može se preklopiti uz donji dio kreveta
- Koristan oslonac koji olakšava ustajanje iz kreveta i sjedanje na njega
- Stabilizacijski okvir postavlja se ispod madraca

12. JAMSTVO

Moretti proizvodi imaju jamstvo od grešaka u materijalu ili proizvodnji 2 godine od datuma kupnje, osim mogućih izuzeća ili ograničenja kako slijedi. Jamstvo se ne odnosi na moguća oštećenja uzrokovana nepravilnom uporabom, zlouporabom ili preinakama, a jamstvo neće biti valjano ako se upute za uporabu ne pridržavaju strogo. Ispravna namjena navedena je u ovom priručniku. Moretti nije odgovoran za posljednu štetu, tjelesne ozljede ili bilo što uzrokovano ili u vezi s pogrešnom ugradnjom ili nepravilnom uporabom. Moretti jamstvo ne pokriva štete nastale uslijed: prirodne katastrofe, neovlaštenog održavanja ili popravaka, kvarova uzrokovanih problemima s opskrbljivanjem električnom energijom (kada je to potrebno), korištenja rezervnih dijelova koje ne pokriva Moretti, nepravilne uporabe, neovlaštenih preinaka, oštećenja prilikom dostave (razlikuje se od originalne Moretti pošiljke) ili u slučaju nedovoljnog održavanja kako je navedeno u priručniku. Jamstvo ne pokriva komponente podložne habanju tijekom ispravne upotrebe uređaja.

13. POPRAVKI

13.1 Popravak u jamstvu

Ako se na proizvodu marke Moretti tijekom jamstvenog roka pojave nedostaci u materijalu ili proizvodnji, tvrtka Moretti provjerit će s kupcem može li se navedeni nedostatak otkloniti u okviru jamstva. Tvrtka Moretti, prema vlastitoj isključivoj procjeni, može odlučiti o popravku ili zamjeni proizvoda; popravak ili zamjena mogu se obaviti putem ovlaštenog distributera ili u sjedištu tvrtke Moretti. Ako je popravak pokriven jamstvom, trošak rada snosi tvrtka Moretti. Popravak ili zamjena proizvoda ne produljuju trajanje jamstva.

