HR

MEDICAL DIRECT

UNIVERZALNA SAMOSTOJEĆA OGRADA ZA KREVET



UPUTE ZA KORIŠTENJE

SKU: MP165

1. ŠIFRE
MP165 Univerzalna samostojeća ograda za krevet

2. UVOD
Hvala vam što ste odabrali dodatak MOPEDIA tvrtke Moretti. Ove zaštitne ograde za krevet osmišljene su i izrađene kako bi zadovoljile sve vaše potrebe za praktičnom, pravilnom i sigurnom uporabom. Ovaj priručnik sadrži upute za pravilnu uporabu odabranog dodatka, kao i korisne savjete za vašu sigurnost. Prije uporabe zaštitnih ograda za krevet, pažljivo pročitajte cijeli priručnik.

OPREZ!
• Nemojte koristiti ovaj uređaj u svrhe koje nisu opisane u ovom priručniku.
• Tvrtka Moretti S.p.A. ne snosi odgovornost za štetu nastalu nepravilnom uporabom uređaja ili uporabom koja odstupa od one opisane u ovom priručniku.
• Zadržavamo pravo na izmjene uređaja i ovog priručnika bez prethodne najave, u svrhu poboljšanja karakteristika proizvoda.
• Uvijek obratite pozornost na pokretne dijelove koji bi mogli uzrokovati zaglavljivanje udova i ozljede.
• Uvijek vodite računa o prisutnosti djece.

3. NAMJENA
Zaštitna ograda za krevet univerzalni je dodatak osmišljen kako bi spriječio slučajan pad osobe s bilo kojeg kreveta. Može poslužiti kao korisan oslonac koji olakšava podizanje iz kreveta i sjedanje na njega, a po želji se može postaviti na bilo koju stranu kreveta.

4. IZJAVA O SUKLADNOSTI
Moretti S.p.A. izjavljuje, pod svojom isključivom odgovornošću, da su proizvodi koje proizvodi i stavlja na tržište tvrtka Moretti S.p.A., a koji pripadaju skupinama KREVETI – TULIPANO i IBISCO, u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2017/745 o MEDICINSKIM PROIZVODIMA od 5. travnja 2017.
U tu svrhu, Moretti S.p.A. jamči i izjavljuje, pod svojom isključivom odgovornošću, sljedeće:
1. Proizvodi udovoljavaju zahtjevima opće sigurnosti i učinkovitosti propisanim u Prilogu I. Uredbe 2017/745, u skladu s odredbama Priloga IV. navedene Uredbe.
2. Proizvodi NISU MJERNI INSTRUMENTI.
3. Proizvodi NISU NAMIJENJENI ZA KLINIČKA ISPITIVANJA.
4. Proizvodi su pakirani u NESTERILNA PAKIRANJA.
5. Proizvodi pripadaju I. klasi sukladno odredbama Priloga VIII. navedene Uredbe.
6. Moretti S.p.A. stavlja na raspolaganje nadležnim tijelima tehničku dokumentaciju kojom se dokazuje sukladnost s Uredbom 2017/745, i to najmanje 10 godina od proizvodnje posljednje serije.
Napomena: Potpuni kodovi proizvoda, registracijski broj proizvođača (SRN), UDI-DI kod te sve reference na primjenjive propise navedeni su u EU izjavi o sukladnosti koju Moretti S.p.A. izdaje i stavlja na raspolaganje putem svojih kanala.

5. OPĆA UPOZORENJA
• Za pravilnu uporabu uređaja pogledajte ovaj priručnik.
• Prije uporabe uređaja posavjetujte se sa svojim liječnikom ili terapeutom.
• Zapakirani proizvod držite podalje od izvora topline jer je ambalaža izrađena od kartona.
• Vijek trajanja dodatka određen je trošenjem dijelova koji se ne mogu popraviti i/ili zamijeniti.
• Uvijek obratite pozornost na prisutnost djece.
• Zaštitna ograda za krevet nije namijenjena podnošenju cjelokupne tjelesne težine osobe. Ovaj je proizvod namijenjen isključivo pružanju ravnoteže i potpore pri sjedanju i ustajanju.
• Korisnik i/ili pacijent dužni su prijaviti svaki ozbiljan incident povezan s uređajem proizvođaču i nadležnom tijelu države u kojoj korisnik i/ili pacijent boravi.

6. OPĆI OPIS
Univerzalne zaštitne ograde za krevet osmišljene su tako da odgovaraju svakom krevetu, zahvaljujući teleskopskim cijevima koje se postavljaju ispod madraca.


6.1 Popis dijelova



1. Gornja ručka (1 kom.)
2. Okvir (1 kom.)
3. Spojni element (1 kom.)
4. Noge (2 kom.)
5. Džep za odlaganje (1 kom.)
6. Sigurnosna traka (1 kom.)

7. SASTAVLJANJE
7.1 Sastavljanje
Slijedite upute u nastavku:
1. Postavite ručku (handle-M) na okvir, prilagodite visinu pomoću kopči i pričvrstite džep za odlaganje sitnica. (1-1 i 2-2).
2. Postavite noge na okvir, prilagođavajući njihovu duljinu visini kreveta pomoću kopči. (3-3 i 4-4).

Upotrijebite vijak za podešavanje na dnu kako biste osigurali savršen kontakt s podom.
3. Umetnite poprečni spojni element koji povezuje glavni okvir. (5-5 i 6-6).
4. Postavite sastavljenu konstrukciju između madraca i okvira kreveta.
5. Pričvrstite remen za okvir kreveta na suprotnoj strani kreveta.

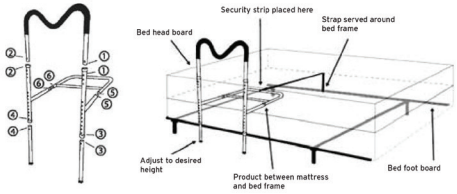

8.2 Demontaža
Slijedite gore opisani postupak obrnutim redoslijedom.

8. PRIJE UPORABE
• Uvijek provjerite istrošenost mehaničkih dijelova uređaja kako biste osigurali njegovu uporabu uz potpunu sigurnost za osobe i imovinu.
• Ponovno provjerite je li uređaj ispravno sastavljen te obratite pozornost na pričvršćivanje bočnih ograda za okvir kreveta.

9. MJERE OPREZA PRI UPORABI
Sastavite uređaj prema priručniku s uputama, a visinu zaštitne ograde prilagodite svojim potrebama pomoću kopči. Postavite zaštitnu ogradu između madraca i okvira kreveta.

NAPOMENA: Uvijek provjerite je li zaštitna ograda u zaključanom položaju.

Uređaji MOPEDIA tvrtke Moretti S.P.A. pažljivo se provjeravaju te pri stavljanju na tržište nose oznaku CE. Radi sigurnosti pacijenata i liječnika, preporučujemo da uređaj svake dvije godine pregleda proizvođač ili ovlašteni laboratorij. U slučaju popravka, koristite isključivo originalne rezervne dijelove i dodatnu opremu.

10. ČIŠĆENJE
10.1 Čišćenje
Koristite samo vlažnu krpu i blagi sapun. Nakon čišćenja, a prije ponovne uporabe, temeljito osušite.

10.2 Dezinfekcija
Ako je potrebna dezinfekcija proizvoda, upotrijebite uobičajeno sredstvo za dezinfekciju.

NAPOMENA: Nikada nemojte koristiti kiseline, lužine ili otapala, poput acetona ili razrjeđivača.

11. TEHNIČKE ZNAČAJKE
11.1 Dimenzije
• Visina nogu (od poda) podesiva od 34 do 52 cm
• Visina bočne ručke (od kreveta) podesiva od 47 do 52 cm
• Širina 45 cm
• Duljina 64 cm

11.2 Tehničke specifikacije
• Okvir od eloksiranog aluminija
• Poliuretanska ručka podesiva u 3 visinske razine; služi kao oslonac koji olakšava ustajanje iz kreveta i sjedanje na krevet
• Noge podesive po visini u 9 položaja
• Stabilizacijski okvir umeće se ispod madraca i opremljen je fiksnim protukliznim umetcima od mekog poliuretana

12. JAMSTVO
Moretti proizvodi imaju jamstvo od grešaka u materijalu ili proizvodnji 2 godine od datuma kupnje, osim mogućih izuzeća ili ograničenja kako slijedi. Jamstvo se ne odnosi na moguća oštećenja uzrokovana nepravilnom uporabom, zlouporabom ili preinakama, a jamstvo neće biti valjano ako se upute za uporabu ne pridržavaju strogo. Ispravna namjena navedena je u ovom priručniku. Moretti nije odgovoran za posljedičnu štetu, tjelesne ozljede ili bilo što uzrokovano ili u vezi s pogrešnom ugradnjom ili nepravilnom uporabom. Moretti jamstvo ne pokriva štete nastale uslijed: prirodne katastrofe, neovlaštenog održavanja ili popravaka, kvarova uzrokovanih problemima s opskrbom električnom energijom (kada je to potrebno), korištenja rezervnih dijelova koje ne pokriva Moretti, nepravilne uporabe, neovlaštenih preinaka, oštećenja prilikom dostave (razlikuje se od originalne Moretti pošiljke) ili u slučaju nedovoljnog održavanja kako je navedeno u priručniku. Jamstvo ne pokriva komponente podložne habanju tijekom ispravne upotrebe uređaja.