HR

MEDICAL DIRECT

DELUXE POVIŠENJE ZA WC I BIDE VISINE 10 CM



UPUTE ZA KORIŠTENJE

SKU: RP440

1. ŠIFRE
RP440 Deluxe povišenje za WC i bide visine 10 cm

2. UVOD
Hvala vam što ste kupili povišenja za WC školjku marke MOPEDIA (tvrtke Moretti S.p.A.), namijenjena osobama s poteškoćama u kretanju. Njihov dizajn i kvaliteta jamče maksimalnu udobnost, pouzdanost i sigurnost. Povišenja za WC školjku MOPEDIA (tvrtke Moretti S.p.A.) osmišljena su i izrađena kako bi zadovoljila sve vaše potrebe.
Ovaj priručnik s uputama sadrži korisne savjete za pravilnu uporabu uređaja koji ste kupili, kao i važne preporuke za vašu sigurnost. U slučaju nedoumica, obratite se svom prodavaču koji će vam moći pružiti potrebnu pomoć.

Napomena: Prije uporabe provjerite ima li na bilo kojem dijelu oštećenja nastalih tijekom transporta i isprobajte uređaj. Ako uočite oštećenje, nemojte koristiti uređaj. Za daljnje upute obratite se svom prodavaču.

3. NAMJENA
MOPEDIA univerzalno povišeno bide i WC sjedalo pomagalo je namijenjeno osobama s poteškoćama u kretanju kao pomoć pri korištenju bidea i WC školjke.


UPOZORENJE!
• Ne koristite proizvod u svrhe koje nisu navedene u ovom priručniku.
• Moretti S.p.A ne snosi nikakvu odgovornost za posljedice proizašle iz nepravilne uporabe ovog proizvoda ili neovlaštenih preinaka na njegovoj konstrukciji.
• Proizvođač zadržava pravo izmjene informacija sadržanih u ovom dokumentu bez prethodne najave.

4. IZJAVA O SUKLADNOSTI
Moretti S.p.A. izjavljuje, pod svojom isključivom odgovornošću, da je proizvod koji proizvodi i stavlja u promet tvrtka Moretti S.p.A., a koji pripada skupini ŠTAPOVA ZA HODANJE, u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2017/745 o MEDICINSKIM PROIZVODIMA od 5. travnja 2017.
U tu svrhu, Moretti S.p.A. jamči i izjavljuje, pod svojom isključivom odgovornošću, sljedeće:
1. Proizvodi udovoljavaju zahtjevima opće sigurnosti i učinkovitosti propisanim u Prilogu I. Uredbe 2017/745, u skladu s odredbama Priloga IV. navedene Uredbe.
2. Proizvodi NISU MJERNI INSTRUMENTI.
3. Proizvodi NISU NAMIJENJENI ZA KLINIČKA ISPITIVANJA.
4. Proizvodi su pakirani u NESTERILNA PAKIRANJA.
5. Proizvodi pripadaju I. klasi sukladno odredbama Priloga VIII. navedene Uredbe 2017/745.
6. Moretti S.p.A. stavlja na raspolaganje nadležnim tijelima tehničku dokumentaciju kojom se dokazuje sukladnost s Uredbom 2017/745, i to u razdoblju od najmanje 10 godina od proizvodnje posljednje serije.

Napomena: Potpuni kodovi proizvoda, registracijski broj proizvođača (SRN), UDI-DI kod te sve reference na primjenjive propise navedeni su u EU izjavi o sukladnosti koju tvrtka Moretti S.p.A. izdaje i stavlja na raspolaganje putem svojih kanala.

5. OPĆA UPOZORENJA
Prije uporabe uređaja pažljivo PROČITAJTE cijeli priručnik.
• Provjerite je li proizvod isporučen u potpunosti te ga čuvajte zapakiranog, dalje od izvora topline.
• Preporučujemo uporabu isključivo za jednog pacijenta.
• Uređaj se mora dezinficirati prije svake ponovne uporabe.
• VIJEK TRAJANJA: Ograničenje uporabe uređaja određeno je istrošenošću dijelova koji se ne mogu popraviti ili zamijeniti. Vijek trajanja ni u kojem slučaju ne može biti dulji od 10 godina.
• NE dopustite djeci da se igraju uređajem ili njime rukuju.
• Korisnik i/ili pacijent dužni su prijaviti svaki ozbiljan štetni događaj povezan s uređajem proizvođaču i nadležnom tijelu države u kojoj se korisnik i/ili pacijent nalazi.

6. OPĆI OPIS
Deluxe povišenje za WC i bide od EVA materijala – ekspandirane plastike, odnosno pjene sa zatvorenim ćelijama.

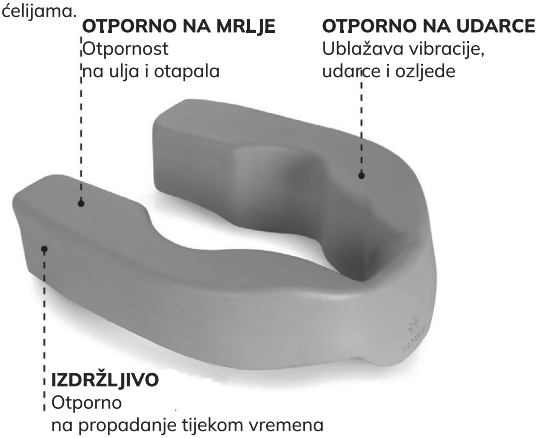

UPOZORENJE!
Povišenje za bide i WC školjku DUO izrađeno je od novorazvijenog materijala zvanog E.V.A. (etilen-vinil acetat), koji omogućuje izradu iznimno elastičnih i mekih proizvoda prilagodljivih različitim namjenama. Zahvaljujući materijalu E.V.A., gotov proizvod je otporan na mrlje i vodootporan. Proizvodnja povišenja DUO odvija se zagrijavanjem materijala E.V.A. na temperaturu od približno 150 °C tijekom 10 minuta, čime dolazi do polimerizacije i posljedičnog širenja materijala. Hlađenjem se povišenje stabilizira, zadržavajući pritom svoju elastičnost i mekoću. Zbog specifičnosti proizvodnog procesa i korištenog materijala, površina povišenja DUO može biti neravna ili sadržavati mala udubljenja koja su vidljiva oku, ali ne utječu na korištenje proizvoda. Ove pojave isključivo su posljedica karakteristika korištenog materijala i ne smatraju se nedostacima povišenja DUO. Prisutnost ovih obilježja ne narušava stabilnost ni elastičnost proizvoda, niti umanjuje njegovu funkcionalnost.

7. PRIJE UPORABE

• Provjerite odgovara li oblik bidea i/ili WC školjke za postavljanje;
• Provjerite je li povišeno sjedalo pravilno postavljeno na bide i/ili WC školjku;
• Provjerite stabilnost sjedala i uvjerite se da ne klizi s bidea i/ili WC školjke;
• Provjerite ima li na EVA sjedalu oštećenja koja bi mogla ugroziti njegovu stabilnost.

8. ČIŠĆENJE

8.1 Čišćenje



Bidet Wc

Za uklanjanje prašine koristite samo vlažnu krpu, a za tvrdokorniju prljavštinu koristite vlažnu krpu s blagim sapunom. Prije upotrebe temeljito osušite. Nikada ne koristite vodu temperature iznad 30°C. Nikada ne koristite mlaz vode ili perilicu rublja na paru.

UPOZORENJE!
Prilikom čišćenja nemojte koristiti abrazivne tvari, kiseline, alkohol, sredstva za čišćenje na bazi klora, dezinficijense i aceton, jer te tvari uzrokuju abraziju plastičnih površina i hrđanje metalnih površina.

8.2 Dezinfekcija

• Postavite povišenje na bide i/ili WC dasku kako je prikazano na slikama;
• Ne prekoračujte navedenu maksimalnu nosivost;
• Ne koristite povišenje za WC školjku kao oslonac pri sjedanju na WC školjku ili ustajanju s nje.

9. JAMSTVO

Moretti proizvodi imaju jamstvo od grešaka u materijalu ili proizvodnji 2 godine od datuma kupnje, osim mogućih izuzeća ili ograničenja kako slijedi. Jamstvo se ne odnosi na moguća oštećenja uzrokovana nepravilnom uporabom, zlouporabom ili preinakama, a jamstvo neće biti valjano ako se upute za uporabu ne pridržavaju strogo. Ispravna namjena navedena je u ovom priručniku. Moretti nije odgovoran za posljedičnu štetu, tjelesne ozljede ili bilo što uzrokovano ili u vezi s pogrešnom ugradnjom ili nepravilnom uporabom. Moretti jamstvo ne pokriva štete nastale uslijed: prirodne katastrofe, neovlaštenog održavanja ili popravaka, kvarova uzrokovanih problemima s opskrbom električnom energijom (kada je to potrebno), korištenja rezervnih dijelova koje ne pokriva Moretti, nepravilne uporabe, neovlaštenih preinaka, oštećenja prilikom dostave (razlikuje se od originalne Moretti pošiljke) ili u slučaju nedovoljnog održavanja kako je navedeno u priručniku. Jamstvo ne pokriva komponente podložne habanju tijekom ispravne upotrebe uređaja.

10. POPRAVCI

10.1 Popravak u jamstvu

Jamstveni popravci: U slučaju da se na proizvodu marke Moretti tijekom jamstvenog roka pojavi kvar uzrokovan nedostatkom u materijalu ili greškom u proizvodnji, tvrtka Moretti provjerit će s kupcem je li taj kvar pokriven jamstvom. Moretti, prema vlastitoj procjeni, može popraviti ili zamijeniti proizvod pod jamstvom, bilo kod ovlaštenog distributera ili u prostorima tvrtke Moretti. Trošak rada za popravak snosi tvrtka Moretti ako je popravak pokriven jamstvom. Popravak ili zamjena ne dovode do obnove niti produljenja jamstvenog roka.

Popravci koji nisu pokriveni jamstvom: Proizvod koji nije pokriven jamstvom može se poslati na popravak isključivo uz prethodno odobrenje korisničke službe tvrtke Moretti. Troškove rada i dostave za popravke koji nisu pokriveni jamstvom u potpunosti snosi kupac ili distributer. Na popravke proizvoda koji nisu pokriveni jamstvom daje se jamstvo u trajanju od šest (6) mjeseci, računajući od datuma primitka popravljenog proizvoda.

Uređaji bez nedostataka: Ako nakon pregleda i testiranja vraćenog proizvoda tvrtka Moretti utvrdi da proizvod nije neispravan, o tome će obavijestiti kupca. U tom slučaju proizvod će biti vraćen kupcu, a sve troškove dostave snosi kupac.

10.2 Popravak izvan jamstva

Za originalne rezervne dijelove Moretti vrijedi jamstvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci od datuma primitka.

10.3 Proizvod bez nedostataka

Osim ako nije izričito navedeno u ovom jamstvu i u skladu s važećim zakonskim propisima, Moretti ne daje nikakve izjave, jamstva ni uvjete, bilo izričite ili podrazumijevane, uključujući izjave, jamstva ili uvjete koji se odnose na tržišnu prikladnost, prikladnost za određenu namjenu, nekršenje prava trećih strana ili nesmetano korištenje. Moretti ne jamči da će korištenje proizvoda Moretti biti neprekinuto ili bez pogrešaka. Trajanje svih podrazumijevanih jamstava koja mogu biti propisana zakonom ograničeno je na razdoblje trajanja jamstva, u skladu s važećim zakonskim propisima. Neke države ne dopuštaju ograničenja trajanja podrazumijevanih jamstava niti isključenje ili ograničenje odgovornosti za slučajne ili posljedične štete u vezi s potrošačkim proizvodima. U takvim državama ili zemljama određena odricanja i ograničenja navedena u ovom jamstvu možda se na vas neće primjenjivati. Ovo jamstvo podložno je promjenama bez prethodne obavijesti.