HR

MEDICAL DIRECT

LAGANI KUĆNI ROLATOR



UPUTE ZA KORIŠTENJE

SKU: RP505

Za reklamacije obratite se na:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr

1. UVOD
Hvala vam što ste odabrali hodalicu iz MOPEDIA asortimana tvrtke Moretti S.p.A. Hodalice iz MOPEDIA asortimana dizajnirane su kako bi zadovoljile sve vaše zahtjeve za praktičnu, pravilnu i sigurnu upotrebu. Ovaj priručnik pruža korisne savjete za ispravno korištenje odabranog uređaja te vam nudi vrijedne preporuke za vašu sigurnost. Preporučujemo da pažljivo pročitate cijeli priručnik prije nego što počnete koristiti kupljenu hodalicu. U slučaju bilo kakvih pitanja, obratite se svom prodavatelju za odgovarajuće savjete ili pomoć.

2. NAMJENA
Ova hodalica namijenjena je osobama s poteškoćama u kretanju. Može se koristiti kao pomoć pri hodanju ili čak kao pomoćni stol za lijekove. Međutim, nije prikladna za osobe s očitim poteškoćama u funkciji ruku ili šaka, niti za osobe s problemima ravnoteže. Hodalica se može koristiti u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Preporučujemo korištenje na ravnim površinama gdje kotači mogu stabilno dodirivati tlo. Ne smije se koristiti na kamenitim ili nagnutim površinama jer može postati nestabilna. Ovaj uređaj nije namijenjen za prijevoz osoba ili predmeta.

UPOZORENJE!
• Ne koristite proizvod u svrhe koje nisu navedene u ovom priručniku.
• Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakve posljedice nastale nepravilnom uporabom ovog proizvoda ili neovlaštenim preinakama na okviru proizvoda.
• Proizvođač zadržava pravo izmjene informacija sadržanih u ovom dokumentu bez prethodne obavijesti.

3. OPĆA UPOZORENJA
3.1 Opća upozorenja
• NE instalirajte niti koristite uređaj prije nego što pročitate i razumijete ovaj priručnik. Ako ne razumijete upozorenja, mjere opreza ili upute, obratite se medicinskom stručnjaku, ovlaštenom prodavaču ili tehničkom osoblju prije pokušaja instalacije kako biste izbjegli ozljede ili oštećenja.
• Hodalicu smiju koristiti samo pacijenti s odgovarajućim motoričkim sposobnostima koje omogućuju sigurnu upotrebu.
• Prije upotrebe, posavjetujte se s liječnikom ili terapeutom kako biste pravilno prilagodili visinu i naučili ispravnu tehniku korištenja.
• Hodalice nisu namijenjene za samostalno pokretanje bez korisnikovog aktivnog sudjelovanja.

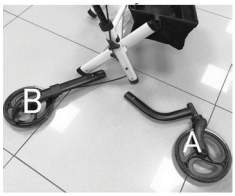
3.2 Upozorenja pri korištenju
1. Provjerite je li kočioni kabel pravilno podešen.
2. Nakon svake prilagodbe visine provjerite ispravnost kočnica kako biste izbjegli savijanje sajli.
3. Nepoštivanje ovih jednostavnih pravila može uzrokovati ozljede.
4. Hodalica se smije koristiti samo na tvrdoj, ravnoj podlozi. Ne koristite hodalicu za penjanje po stepenicama.
5. Uvijek se oslanjajte na obje ručke kako biste održali ravnotežu.
6. Budite posebno oprezni pri hodanju po mokrim, zaleđenim ili snježnim površinama.
7. Ne preopterećujte hodalicu.
8. Sve kotače hodalice uvijek treba držati u kontaktu s tlom radi pravilne stabilnosti i maksimalne sigurnosti.
9. Prije korištenja sjedala, obavezno aktivirajte kočnice.
Napomena: Kada se hodalica koristi u mirovanju, ručna kočnica mora biti zaključana.

3.3 Upozorenja o stabilnosti
• Hodalica pruža pomoć pri hodanju osobama do 136 kg, uključujući teret u torbi.
• Maksimalna nosivost torbe na hodalici iznosi 5 kg.

3.4 Upozorenja pri sklapanju i rasklapanju
• Provjerite jesu li obje cijevi potpore ručki pravilno umetnute u okvir i osigurane pomoću pričvrsnih matica i ručki bez mogućnosti pomicanja.
• Obje ručke moraju biti sigurno pričvršćene na glavni okvir pomoću matica i ručki bez ikakvih pomaka.
• Nemojte vješati predmete na okvir hodalice kako biste izbjegli deformaciju cijevi i smanjenje stabilnosti.

Deformacije mogu uzrokovati i ozljede.
Napomena: Pazite da prilikom sklapanja i rasklapanja ne uhvatite prste ili odjeću.

4. OPĆI OPIS
4.1 Prije sastavljanja proizvoda
Raspakirajte proizvod i provjerite je li došlo do oštećenja tijekom transporta. U slučaju bilo kakvog oštećenja, odmah kontaktirajte najbližeg ovlaštenog prodavača.

4.2 Sastavljanje i rastavljanje


1. Otvorite hodalicu i košaru dok se plastična kopča ne zaključa.
2. Umetnite prednje kotače A i stražnje kotače B na njihova mjesta.
3. Postavite prozirni plastični pladanj na vrh košare.
4. Za rastavljanje i zatvaranje, pratite ove korake obrnutim redoslijedom.

UPOZORENJE!
• Provjerite jesu li svi vijci i ručke pravilno umetnuti u predviđene otvore.
• Prije upotrebe uvijek provjerite da se hodalica ne zatvara pod utjecajem manjeg bočnog pritiska.

4.3 Podešavanje ručki
1. Kako biste podesili visinu ručki, odvrnite ručke i uklonite plastične blokade s obje strane.
2. Podignite ili spustite ručke na željenu visinu, pritom primjenjujući jednak pritisak s obje strane.
3. Ponovno postavite plastične blokade i zavrnite ručke, pritom pazeći da su pravilno postavljene u predviđene otvore.

5. UPUTE ZA UPOTREBU
- Provjerite da su vam ruke suhe prije korištenja hodalice kako biste izbjegli rizik od klizanja.
- Hodajte održavajući uspravan položaj, s pogledom usmjerenim prema naprijed, a ne prema dolje.
- Nemojte gurati hodalicu previše daleko od tijela, jer to može uzrokovati padove i nepravilna opterećenja.
- Nemojte koristiti hodalicu za prelazak preko prepreka viših od 20 mm.
- Prilikom korištenja na otvorenom, preferirajte nogostupe koji su pravilno prilagođeni u skladu s propisima za uklanjanje arhitektonskih barijera.
- Za savladavanje manjih prepreka, oslonite se na stražnje oslonce za noge kako biste podigli prednji dio hodalice.

6. KOČNICE
Ispravan rad kočnica ovisi o trošenju i prljavštini nakupljenoj na kotačima. Prije upotrebe provjerite stanje kočnica i kotača.

6.1 Kočenje
Za kočenje hodalice povucite ručicu kočnice prstima prema gore dok hodalica ne uspori ili se zaustavi.
Za nastavak kretanja otpustite ručke kočnice.

6.2 Zaključajte kočnicu (ručna kočnica)
Pritisnite ručicu kočnice dlanom, kada čujete «klik» kotači su blokirani. Podignite ručicu kočnice otpuštajući je iz graničnog položaja.
UPOZORENJE! Kada korisnik miruje, kočnice moraju biti blokirane

7. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Za čišćenje dijelova koristite samo vlažnu krpu s neutralnim deterdžentom, nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže otapala i metalne četke ili abrazivne ili oštre predmete, jer mogu oštetiti proizvod.

7.1 Njega kotača
1. Očistite kotače toplom vodom i blagim deterdžentom. Obrišite čistom krpom.
2. Povremeno podmažite kotače.

8. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Dimenzije u cm										
	75	86 - 97	69	57	40	95x56x34cm	6,8	20	20	136 kg

Poslužavnik: 25x39 cm
Struktura: Aluminij

9. JAMSTVO
Moretti proizvodi imaju jamstvo od grešaka u materijalu ili proizvodnji 2 godine od datuma kupnje, osim mogućih izuzeća ili ograničenja kako slijedi. Jamstvo se ne odnosi na moguća oštećenja uzrokovana nepravilnom uporabom, zlouporabom ili preinakama, a jamstvo neće biti valjano ako se upute za uporabu ne pridržavaju strogo. Ispravna namjena navedena je u ovom priručniku. Moretti nije odgovoran za posljedičnu štetu, tjelesne ozljede ili bilo što uzrokovano ili u vezi s pogrešnom ugradnjom ili nepravilnom uporabom. Moretti jamstvo ne pokriva štete nastale uslijed: prirodne katastrofe, neovlaštenog održavanja ili popravaka, kvarova uzrokovanih problemima s opskrbom električnom energijom (kada je to potrebno), korištenja rezervnih dijelova koje ne pokriva Moretti, nepravilne uporabe, neovlaštenih preinaka, oštećenja prilikom dostave (razlikuje se od originalne Moretti pošiljke) ili u slučaju nedovoljnog održavanja kako je navedeno u priručniku. Jamstvo ne pokriva komponente podložne habanju tijekom ispravne upotrebe uređaja.

10. POPRAVCI
10.1 Popravak u jamstvu
Jamstveni popravci: U slučaju da se na proizvodu marke Moretti tijekom jamstvenog roka pojavi kvar uzrokovan nedostatkom u materijalu ili greškom u proizvodnji, tvrtka Moretti provjerit će s kupcem je li taj kvar pokriven jamstvom. Moretti, prema vlastitoj procjeni, može popraviti ili zamijeniti proizvod pod jamstvom, bilo kod ovlaštenog distributera ili u prostorima tvrtke Moretti. Trošak rada za popravak snosi tvrtka Moretti ako je popravak pokriven jamstvom. Popravak ili zamjena ne dovode do obnove niti produljenja jamstvenog roka.

Popravci koji nisu pokriveni jamstvom: Proizvod koji nije pokriven jamstvom može se poslati na popravak isključivo uz prethodno odobrenje korisničke službe tvrtke Moretti. Troškove rada i dostave za popravke koji nisu pokriveni jamstvom u potpunosti snosi kupac ili distributer. Na popravke proizvoda koji nisu pokriveni jamstvom daje se jamstvo u trajanju od šest (6) mjeseci, računajući od datuma primitka popravljenog proizvoda.

Uređaji bez nedostataka: Ako nakon pregleda i testiranja vraćenog proizvoda tvrtka Moretti utvrdi da proizvod nije neispravan, o tome će obavijestiti kupca. U tom slučaju proizvod će biti vraćen kupcu, a sve troškove dostave snosi kupac.

10.2 Popravak izvan jamstva
Za originalne rezervne dijelove Moretti vrijedi jamstvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci od datuma primitka.

10.3 Proizvod bez nedostataka
Osim ako nije izričito navedeno u ovom jamstvu i u skladu s važećim zakonskim propisima, Moretti ne daje nikakve izjave, jamstva ni uvjete, bilo izričite ili podrazumijevane, uključujući izjave, jamstva ili uvjete koji se odnose na tržišnu prikladnost, prikladnost za određenu namjenu, nekršenje prava trećih strana ili nesmetano korištenje. Moretti ne jamči da će korištenje proizvoda Moretti biti neprekinuto ili bez pogrešaka. Trajanje svih podrazumijevanih jamstava koja mogu biti propisana zakonom ograničeno je na razdoblje trajanja jamstva, u skladu s važećim zakonskim propisima. Neke države ne dopuštaju ograničenja trajanja podrazumijevanih jamstava niti isključenje ili ograničenje odgovornosti za slučajne ili posljedične štete u vezi s potrošačkim proizvodima. U takvim državama ili zemljama određena odricanja i ograničenja navedena u ovom jamstvu možda se na vas neće primjenjivati. Ovo jamstvo podložno je promjenama bez prethodne obavijesti.