HR

MEDICAL DIRECT

ALUMINIJSKI ROLATORI OCEANO I GAYA





UPUTE ZA KORIŠTENJE

SKU: RP540 i RP545

1. ŠIFRE

RP540 Aluminijska hodalica s 4 kotača, sjedalom i osloncem za noge GAYA 2.0
RP545 Aluminijska rastavljiva hodalica s 4 kotača i sjedalom OCEANO 2.0

2. UVOD

Zahvaljujemo što ste odabrali hodalicu iz asortimana MOPEDIA tvrtke Moretti S.p.A. Hodalice MOPEDIA koje proizvodi Moretti S.p.A. osmišljene su tako da zadovolje sve vaše zahtjeve za praktičnu, pravilnu i sigurnu uporabu. Ove upute sadrže korisne savjete za pravilnu uporabu odabranog proizvoda te važne preporuke za vašu sigurnost. Prije uporabe kupljene hodalice preporučujemo da pažljivo pročitate cijele upute. Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite se svom prodavaču za savjet ili pomoć.

3. NAMJENA

Ova je hodalica namijenjena osobama s poteškoćama u kretanju. Može se koristiti kao pomagalo koje olakšava hodanje ili kao potpora pri hodanju uz pomoć druge osobe. Ne smiju je koristiti osobe s izraženim oštećenjem funkcije šake ili ruke, kao ni osobe s poteškoćama s ravnotežom. Hodalica se može koristiti u zatvorenom i na otvorenom. Preporučuje se uporaba na ravnoj podlozi na kojoj svi kotači dodiruju tlo. Ne smije se koristiti na kamenitom terenu ni na nagnutim površinama jer hodalica može postati nestabilna. Proizvod nije namijenjen prijevozu osoba ni predmeta.

UPOZORENJE!
• Proizvod ne koristite u svrhu koja nije navedena u ovim uputama.
• Moretti S.p.A. ne preuzima nikakvu odgovornost za posljedice nepravilne uporabe ovog proizvoda ni neovlaštenih preinaka njegova okvira.
• Proizvođač zadržava pravo izmjene podataka u ovom dokumentu bez prethodne najave.

4. IZJAVA O SUKLADNOSTI

Moretti S.p.A. pod isključivom odgovornošću izjavljuje da je proizvod koji proizvodi i stavlja na tržište Moretti S.p.A., a koji pripada skupini HODALICA – MOPEDIA, sukladan odredbama Uredbe 2017/745 o MEDICINSKIM PROIZVODIMA od 5. travnja 2017. U tu svrhu Moretti S.p.A. pod isključivom odgovornošću jamči i izjavljuje sljedeće:
1. Proizvodi ispunjavaju opće zahtjeve sigurnosti i učinkovitosti iz Priloga I. Uredbe 2017/745, kako je propisano Prilogom IV. navedene uredbe.
2. Proizvodi NISU MJERNI INSTRUMENTI.
3. Proizvodi NISU NAMIJENJENI KLINIČKIM ISPITIVANJIMA.
4. Proizvodi su pakirani u NESTERILNU AMBALAŽU.
5. Proizvodi pripadaju klasi I u skladu s odredbama Priloga VIII. navedene uredbe.
6. Moretti S.p.A. nadležnim tijelima stavlja na raspolaganje tehničku dokumentaciju kojom se dokazuje sukladnost s Uredbom 2017/745, najmanje 10 godina od proizvodnje posljednje serije.

5. UPOZORENJA

5.1 Opća upozorenja

• NE sastavljajte i ne koristite proizvod prije nego što pročitate i razumijete ove upute. Ako ne razumijete upozorenja, mjere opreza ili upute, prije sastavljanja opreme obratite se zdravstvenom djelatniku, prodavaču ili tehničkom osoblju kako biste izbjegli ozljede ili oštećenja;
• Hodalicu smiju koristiti samo pacijenti s odgovarajućim motoričkim sposobnostima koje omogućuju njezinu uporabu bez rizika;
• Posavjetujte se s liječnikom ili terapeutom o pravilnom podešavanju i pravilnoj uporabi;
• Liječnik ili terapeut trebao bi pomoći pri podešavanju visine radi najveće potpore, pri pravilnom podešavanju kočnica i pri općem sastavljanju;
• Hodalice nisu namijenjene uporabi kao samohodni uređaji;
• Korisnik i/ili pacijent dužan je svaki ozbiljan štetni događaj povezan s proizvodom prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države u kojoj korisnik i/ili pacijent ima prebivalište.

5.2 Upozorenja za uporabu

• Provjerite je li sajla kočnice pravilno namještena;
• Nakon svakog podešavanja visine provjerite ispravnost rada kočnice kako sajla ne bi bila previše labava;
• Nepridržavanje ovih jednostavnih pravila može uzrokovati ozljede;
• Hodalica se smije koristiti samo na tvrdoj i ravnoj podlozi. Ne koristite hodalicu za penjanje stubama;
• Uvijek se oslanjajte na obje ručke kako biste održali ravnotežu;
• Budite posebno oprezni na mokrim, zaleđenim ili zasniježenim površinama;
• Ne preopterećujte hodalicu;
• Ne koristite sjedalo hodalice (ako postoji) za prijevoz osoba ili stvari; sjedalo služi za odmor korisnika uz zaključanu parkirnu kočnicu;
• Tijekom uporabe svi kotači moraju u svakom trenutku dodirivati tlo kako bi se osigurala pravilna ravnoteža hodalice i najveća sigurnost;
• Prije uporabe sjedala kočnica mora biti zaključana.

Napomena: kada se hodalica koristi u mirovanju, ručna kočnica mora biti zaključana.

5.3 Upozorenja o stabilnosti

• Hodalica može pružiti potporu pri hodanju osobi tjelesne težine do 136 kg, UKLJUČUJUĆI teret u torbi;
• Najveća dopuštena nosivost torbe hodalice je 5 kg.

5.4 Upozorenja za sastavljanje i sklapanje

• Provjerite jesu li obje cijevi nosača ručki pravilno umetnute u okvir i učvršćene zateznim vijcima te čvrsto pritegnute u nosaču bez ikakvog pomicanja;
• Obje cijevi ručki moraju biti čvrsto učvršćene u glavnom nosaču leptir-maticama i zateznim vijcima, bez ikakvog pomicanja;
• Ne vješajte ništa na okvir hodalice kako ne bi došlo do savijanja cijevi dok je hodalica otvorena i do narušavanja stabilnosti. Savijanje može uzrokovati i ozljede;

6. PRIJE UPORABE


Prije uporabe proizvoda uvijek provjerite:
1. jesu li svi dijelovi hodalice sigurno zaključani;
2. jesu li svi vijci pritegnuti;
3. je li sjedalo pravilno zaključano (ako nije, dodatno pritisnite sjedalo prema donjem okviru);
4. je li blokada sjedala pravilno umetnuta;
5. ispravnost rada kočnice i njezinu pravilnu podešenost.

7. UPUTE ZA SASTAVLJANJE

7.1 Prije sastavljanja proizvoda

Raspakirajte proizvod i provjerite da nije oštećen tijekom prijevoza. Ako je hodalica oštećena, obratite se najbližem prodavaču.

7.2 Sastavljanje modela RP540

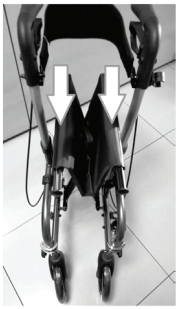

- Hodalica se isporučuje s osloncem za noge zapakiranim zasebno.
- Pri prvom sastavljanju ručke sa zateznim vijcima nisu spojene; umetnite dvije cijevi u okvir.
- Pritisnite sjedalo hodalice dok se cijevi okvira ne zaključaju u položaju.
- Prije uporabe uvijek provjerite da se hodalica ne zatvara pod djelovanjem male bočne sile.
- Postavite oslonac za noge na okvir hodalice.

UPOZORENJE!
Provjerite jesu li zatezni vijci smješteni u otvorima.

7.2.1 Sklapanje hodalice

Čvrsto podignite sjedalo povlačenjem trake na sredini sjedala.

7.2.2 Postavljanje i podešavanje ručki

Umetnite ručke u okvir. Pritisnite opružni gumb i namjestite željenu visinu. Ponovite postupak na drugoj strani i prije uporabe provjerite jesu li obje ručke čvrsto učvršćene i namještene na istu visinu. Hodalica ima ručke podesive po visini pomoću zatika kako bi se zadovoljile sve potrebe korisnika.

UPOZORENJE!
Podesite visinu hodalice tako da ručke budu u visini zapešća korisnika koji stoji uspravno s rukama uz tijelo. Time se osigurava da su ruke tijekom uporabe hodalice savijene pod kutom od oko 20°–30°.

7.2.3 Postavljanje torbe

Za postavljanje torbe objesite ušice torbe na sjedalo, a traku s čičkom pričvrstite za okvir.

UPOZORENJE!
Košaru koristite samo za sitne predmete. Ne preopterećujte torbu kako biste izbjegli gubitak ravnoteže i opasnost od prevrtanja.

7.2.4 Sjedalo

Prije sjedanja postavite hodalicu na ravnu i čvrstu podlogu, a zatim zaključajte kočnice. Provjerite je li zasun blokade pravilno učvršćen i je li hodalica u stabilnom položaju.

UPOZORENJE!
Sjednite tako da težinu ravnomjerno rasporedite po sjedalu. Ne sjedajte oslanjajući se samo na jednu stranu.

7.2.5 Oslonac za noge





Umetnite oslonac za noge na zatike okvira. Ako vam nije potreban, pričvrstite ga na okvir pomoću kopče, kao na slici.

7.3 Sastavljanje modela RP545

- Okrenite kotače u pravilan smjer, otkopčajte remen koji blokira stražnje kotače te pomoću priloženih zateznih vijaka učvrstite stražnje i prednje kotače.
- Pri prvom sastavljanju ručke sa zateznim vijcima nisu spojene; umetnite dvije cijevi u okvir.
- Pritisnite sjedalo hodalice dok se cijevi okvira ne zaključaju u položaju.

UPOZORENJE!
Provjerite jesu li zatezni vijci smješteni u otvorima. Prije uporabe uvijek provjerite da se hodalica ne zatvara od djelovanjem male bočne sile. Pazite da pri spajanju ručki i kotača ne uvijete sajle kočnica.

7.3.1 Sklapanje hodalice

Čvrsto podignite sjedalo povlačenjem trake na sredini sjedala.

7.3.2 Postavljanje i podešavanje ručki

Umetnite ručke u okvir. Pritisnite opružni gumb i namjestite željenu visinu. Ponovite postupak na drugoj strani i prije uporabe provjerite jesu li obje ručke čvrsto učvršćene i namještene na istu visinu. Hodalica ima ručke podesive po visini pomoću zatika kako bi se zadovoljile sve potrebe korisnika.

UPOZORENJE!
Podesite visinu hodalice tako da ručke budu u visini zapešća korisnika koji stoji uspravno s rukama uz tijelo. Time se osigurava da su ruke tijekom uporabe hodalice savijene pod kutom od oko 20°–30°.

7.3.3 Postavljanje torbe

Za postavljanje torbe objesite ušice torbe na sjedalo, a traku s čičkom pričvrstite za okvir.

UPOZORENJE!
Najveća nosivost torbe je 5 kg. Torbu koristite samo za sitne predmete. Ne preopterećujte torbu kako biste izbjegli gubitak ravnoteže i opasnost od prevrtanja.

7.3.4 Sjedalo
Prije sjedanja postavite hodalicu na ravnu i čvrstu podlogu, a zatim zaključajte kočnice. Provjerite je li zasun blokade pravilno učvršćen i je li hodalica u stabilnom položaju.

UPOZORENJE!
Sjednite tako da težinu ravnomjerno rasporedite po sjedalu. Ne sjedajteoslanjajući se samo na jednu stranu.

8. NAČIN UPORABE
• Počnite gurati hodalicu kada stojite uspravno s objema rukama na ručkama;
• Prije uporabe hodalice provjerite jesu li vam ruke suhe kako biste izbjegli opasnost od proklizavanja;
• Hodajte uspravno, s pogledom usmjerenim naprijed, a ne prema dolje;
• Ne gurajte hodalicu predaleko od tijela jer to može uzrokovati pad i nepravilno opterećenje;
• Ne koristite hodalicu za svladavanje stuba viših od 20 mm;
• Na otvorenom birajte nogostupe uređene u skladu s propisima o uklanjanju arhitektonskih barijera;
• Za svladavanje manjih prepreka nagazite na stražnje papučice kako biste podigli prednji dio hodalice.

9. KOČNICE
9.1 Kočenje
Za kočenje hodalice prstima povucite ručicu kočnice prema gore dok hodalica ne uspori ili se ne zaustavi. Za nastavak kretanja otpustite ručice kočnica.
9.2 Zaključavanje kočnice (parkirna kočnica)
Dlanom pritisnite ručicu kočnice prema dolje; kada začujete „klik", kotači su zaključani. Za otpuštanje podignite ručicu kočnice iz zaključanog položaja.

UPOZORENJE!
Kada korisnik miruje, kočnice moraju biti zaključane.

10. NJEGA I ODRŽAVANJE
Proizvodi MOPEDIA tvrtke Moretti S.p.A. koji se nalaze na tržištu pažljivo su provjereni i nose oznaku CE. Radi sigurnosti pacijenta i liječnika preporučuje se da proizvođač ili ovlašteni servis najmanje svake 2 godine provjeri prikladnost vaše hodalice za uporabu. Za popravke koristite isključivo originalne rezervne dijelove i pribor. Vijek trajanja proizvoda ovisi o načinu uporabe, održavanju, skladištenju i čišćenju.

11. ČIŠĆENJE
Dijelove čistite isključivo vlažnom krpom i blagim (neutralnim) deterdžentom. Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže otapala, metalne četke ni abrazivne ili oštre predmete jer mogu oštetiti proizvod.

12. NJEGA KOTAČA
1. Kotače očistite toplom vodom i blagim deterdžentom. Obrišite ih do suha čistom krpom.
2. Kotače povremeno podmažite.

13. TEHNIČKE ZNAČAJKE
Serija GAYA 2.0

75	85 - 97	55	63	52	28	9,6	20	20	136 kg

Serija OCEANO 2.0

69	79 - 92	54	62	47	27	7,6	20	20	136 kg

14. JAMSTVO
Moretti proizvodi imaju jamstvo od grešaka u materijalu ili proizvodnji 2 godine od datuma kupnje, osim mogućih izuzeća ili ograničenja kako slijedi. Jamstvo se ne odnosi na moguća oštećenja uzrokovana nepravilnom uporabom, zlouporabom ili preinakama, a jamstvo neće biti valjano ako se upute za uporabu ne pridržavaju strogo. Ispravna namjena navedena je u ovom priručniku. Moretti nije odgovoran za posljedičnu štetu, tjelesne ozljede ili bilo što uzrokovano ili u vezi s pogrešnom ugradnjom ili nepravilnom uporabom. Moretti jamstvo ne pokriva štete nastale uslijed: prirodne katastrofe, neovlaštenog održavanja ili popravaka, kvarova uzrokovanih problemima s opskrbom električnom energijom (kada je to potrebno), korištenja rezervnih dijelova koje ne pokriva Moretti, nepravilne uporabe, neovlaštenih preinaka, oštećenja prilikom dostave (razlikuje se od originalne Moretti pošiljke) ili u slučaju nedovoljnog održavanja kako je navedeno u priručniku. Jamstvo ne pokriva komponente podložne habanju tijekom ispravne upotrebe uređaja.