HR

MEDICAL DIRECT

SKLOPIVA PODPAZUŠNA HODALICA



UPUTE ZA KORIŠTENJE

SKU: RP754S

1. ŠIFRE
RP754S Sklopiva podpazušna hodalica

2. UVOD
Hvala vam što ste kupili hodalicu MOPEDIA tvrtke Moretti S.p.A. Ovaj korisnički priručnik sadrži upute za pravilnu uporabu odabranog proizvoda, kao i korisne savjete za vašu sigurnost. Molimo vas da prije uporabe proizvoda pažljivo pročitate priručnik. U slučaju bilo kakvih pitanja, obratite se svom prodavaču radi savjeta i pomoći.

3. NAMJENA
Hodalice Mopedia proizvođača Moretti pomagala su namijenjena za uporabu uz oslonac na obje ruke, a predviđena su za osobe s poteškoćama u kretanju.

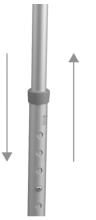
UPOZORENJE!
• Ne koristite proizvod u svrhe koje nisu navedene u ovom priručniku.
• Moretti S.p.A ne snosi nikakvu odgovornost za posljedice proizašle iz nepravilne uporabe ovog proizvoda ili neovlaštenih preinaka na njegovoj konstrukciji.
• Proizvođač zadržava pravo izmjene informacija sadržanih u ovom dokumentu bez prethodne najave.

4. IZJAVA O SUKLADNOSTI
Moretti S.p.A. izjavljuje, pod svojom isključivom odgovornošću, da je proizvod koji proizvodi i stavlja u promet tvrtka Moretti S.p.A., a koji pripada skupini ŠTAPOVA ZA HODANJE, u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2017/745 o MEDICINSKIM PROIZVODIMA od 5. travnja 2017.
U tu svrhu, Moretti S.p.A. jamči i izjavljuje, pod svojom isključivom odgovornošću, sljedeće:
1. Proizvodi udovoljavaju zahtjevima opće sigurnosti i učinkovitosti propisanim u Prilogu I. Uredbe 2017/745, u skladu s odredbama Priloga IV. navedene Uredbe.
2. Proizvodi NISU MJERNI INSTRUMENTI.
3. Proizvodi NISU NAMIJENJENI ZA KLINIČKA ISPITIVANJA.
4. Proizvodi su pakirani u NESTERILNA PAKIRANJA.
5. Proizvodi pripadaju I. klasi sukladno odredbama Priloga VIII. navedene Uredbe 2017/745.
6. Moretti S.p.A. stavlja na raspolaganje nadležnim tijelima tehničku dokumentaciju kojom se dokazuje sukladnost s Uredbom 2017/745, i to u razdoblju od najmanje 10 godina od proizvodnje posljednje serije.

Napomena: Potpuni kodovi proizvoda, registracijski broj proizvođača (SRN), UDI-DI kod te sve reference na primjenjive propise navedeni su u EU izjavi o sukladnosti koju tvrtka Moretti S.p.A. izdaje i stavlja na raspolaganje putem svojih kanala.

5. OPĆA UPOZORENJA
Prije uporabe uređaja pažljivo PROČITAJTE cijeli priručnik.
• Provjerite je li proizvod isporučen u potpunosti te ga čuvajte zapakiranog, dalje od izvora topline.
• Preporučujemo uporabu isključivo za jednog pacijenta.
• Uređaj se mora dezinficirati prije svake ponovne uporabe.
• VIJEK TRAJANJA: Ograničenje uporabe uređaja određeno je istrošenošću dijelova koji se ne mogu popraviti ili zamijeniti. Vijek trajanja ni u kojem slučaju ne može biti dulji od 10 godina.
• NE dajte djeci da se igraju uređajem ili njime rukuju.
• Korisnik i/ili pacijent dužni su prijaviti svaki ozbiljan štetni događaj povezan s uređajem proizvođaču i nadležnom tijelu države gdje se korisnik i/ili pacijent nalazi.

6. OPĆI OPIS
Sklopive ili rastavljive hodalice marke MOPEDIA, namijenjene oslanjanju na ramena ili podlaktice, izrađene su kao potpora osobama s poteškoćama u kretanju. Konstrukcija je izrađena od kromiranog i lakiranog čelika, opremljena s četiri kotačića promjera 100 mm (od kojih dva imaju kočnice), a omogućuje prilagodbu visine te širine i dubine oslonca.
Mogućnosti prilagodbe visine i širine omogućuju korištenje proizvoda osobama različite tjelesne građe – od sitnije do krupnije konstitucije.
Ova pomagala olakšavaju kretanje osobama sa smanjenom statičkom i/ili dinamičkom ravnotežom, povećavajući površinu oslonca. Pružaju potporu u slučajevima slabosti i/ili paralize donjih udova. Također omogućuju prenošenje dijela tjelesne težine na ruke, što je korisno kada je potrebno ograničiti opterećenje na jedan ili oba donja uda.

6.1 Za podešavanje visine

Za podešavanje visine pritisnite gumb i pomaknite štap na željenu visinu. Nakon podešavanja provjerite je li gumb u potpunosti izašao kroz odabrani otvor. Ponovite opisani postupak za svaku nogu, a na kraju provjerite jesu li sve četiri noge na istoj visini. Maksimalna nosivost iznosi 130 kg.

6.2 Upute za sastavljanje
1. Započnite sastavljanje hodalice postavljanjem šipke prednjeg okvira, koju treba umetnuti u cijevi bočnog okvira i učvrstiti pomoću dva mesingana gumba.
2. Sklopiva – Jednostavno rasklopite okvir.
3. Podesite oslonce na visinu koja odgovara pacijentu i učvrstite ih pomoću dva zaporna elementa.

7. PRIJE UPORABE
• Prije upotrebe hodalice, uvijek provjerite rade li kočnice (ako su ugrađene);
• Nemojte koristiti hodalicu ako je oštećena ili neispravna; obratite se prodavaču radi popravka;
• Provjerite je li okvir oštećen kako biste osigurali sigurnu upotrebu za korisnike i predmete;
• Korisnici se moraju kretati pješačkim stazama, a ne prometnim cestama;
• Pazite na opasnost od ozljeda uslijed prignječenja; izbjegavajte stavljati prste između pokretnih dijelova hodalice. Budite oprezni prilikom sklapanja i rasklapanja hodalice.

8. KAKO KORISTITI
Hodalica je proizvod namijenjen osobnoj uporabi, stoga bi njezinu visinu trebalo prilagoditi uz pomoć

stručnog osoblja.

Napomena: Pogledajte sigurnosne upute u ovom priručniku. Hodalicu koristite kao pomagalo pri hodanju. U tu svrhu uhvatite dvije ručke i gurajte pomagalo prema naprijed, čime ćete osigurati prikladan i pouzdan oslonac za hodanje.

9. ČIŠĆENJE

9.1 Čišćenje

Za uklanjanje prašine koristite samo vlažnu krpu, a za tvrdokorniju prljavštinu koristite vlažnu krpu s blagim sapunom. Prije upotrebe temeljito osušite. Nikada ne koristite vodu temperature iznad 30°C. Nikada ne koristite mlaz vode ili perilicu rublja na paru.

UPOZORENJE!
Prilikom čišćenja nemojte koristiti abrazivne tvari, kiseline, alkohol, sredstva za čišćenje na bazi klora, dezinficijense i aceton, jer te tvari uzrokuju abraziju plastičnih površina i hrđanje metalnih površina.

9.2 Dezinfekcija

Ako trebate dezinficirati proizvod, koristite uobičajeno sredstvo za dezinfekciju.

UPOZORENJE!
Nikada ne koristite kiseline, lužine ili otapala poput acetona

10. JAMSTVO

Moretti proizvodi imaju jamstvo od grešaka u materijalu ili proizvodnji 2 godine od datuma kupnje, osim mogućih izuzeća ili ograničenja kako slijedi. Jamstvo se ne odnosi na moguća oštećenja uzrokovana nepravilnom uporabom, zlouporabom ili preinakama, a jamstvo neće biti valjano ako se upute za uporabu ne pridržavaju strogo. Ispravna namjena navedena je u ovom priručniku. Moretti nije odgovoran za posljedičnu štetu, tjelesne ozljede ili bilo što uzrokovano ili u vezi s pogrešnom ugradnjom ili nepravilnom uporabom. Moretti jamstvo ne pokriva štete nastale uslijed: prirodne katastrofe, neovlaštenog održavanja ili popravaka, kvarova uzrokovanih problemima s opskrbom električnom energijom (kada je to potrebno), korištenja rezervnih dijelova koje ne pokriva Moretti, nepravilne uporabe, neovlaštenih preinaka, oštećenja prilikom dostave (razlikuje se od originalne Moretti pošiljke) ili u slučaju nedovoljnog održavanja kako je navedeno u priručniku. Jamstvo ne pokriva komponente podložne habanju tijekom ispravne upotrebe uređaja.

11. POPRAVCI

11.1 Popravak u jamstvu

Jamstveni popravci: U slučaju da se na proizvodu marke Moretti tijekom jamstvenog roka pojavi kvar uzrokovan nedostatkom u materijalu ili greškom u proizvodnji, tvrtka Moretti provjerit će s kupcem je li taj kvar pokriven jamstvom. Moretti, prema vlastitoj procjeni, može popraviti ili zamijeniti proizvod pod jamstvom, bilo kod ovlaštenog distributera ili u prostorima tvrtke Moretti. Trošak rada za popravak snosi tvrtka Moretti ako je popravak pokriven jamstvom. Popravak ili zamjena ne dovode do obnove niti produljenja jamstvenog roka.

Popravci koji nisu pokriveni jamstvom: Proizvod koji nije pokriven jamstvom može se poslati na popravak isključivo uz prethodno odobrenje korisničke službe tvrtke Moretti. Troškove rada i dostave za popravke koji nisu pokriveni jamstvom u potpunosti snosi kupac ili distributer. Na popravke proizvoda koji nisu pokriveni jamstvom daje se jamstvo u trajanju od šest (6) mjeseci, računajući od datuma primitka popravljenog proizvoda.

Uređaji bez nedostataka: Ako nakon pregleda i testiranja vraćenog proizvoda tvrtka Moretti utvrdi da proizvod nije neispravan, o tome će obavijestiti kupca. U tom slučaju proizvod će biti vraćen kupcu, a sve troškove dostave snosi kupac.

11.2 Popravak izvan jamstva

Za originalne rezervne dijelove Moretti vrijedi jamstvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci od datuma primitka.

11.3 Proizvod bez nedostataka

Osim ako nije izričito navedeno u ovom jamstvu i u skladu s važećim zakonskim propisima, Moretti ne daje nikakve izjave, jamstva ni uvjete, bilo izričite ili podrazumijevane, uključujući izjave, jamstva ili uvjete koji se odnose na tržišnu prikladnost, prikladnost za određenu namjenu, nekršenje prava trećih strana ili nesmetano korištenje. Moretti ne jamči da će korištenje proizvoda Moretti biti neprekinuto ili bez pogrešaka. Trajanje svih podrazumijevanih jamstava koja mogu biti propisana zakonom ograničeno je na razdoblje trajanja jamstva, u skladu s važećim zakonskim propisima. Neke države ne dopuštaju ograničenja trajanja podrazumijevanih jamstava niti isključenje ili ograničenje odgovornosti za slučajne ili posljedične štete u vezi s potrošačkim proizvodima. U takvim državama ili zemljama određena odricanja i ograničenja navedena u ovom jamstvu možda se na vas neće primjenjivati. Ovo jamstvo podložno je promjenama bez prethodne obavijesti.