HR

MEDICAL DIRECT

4-U-1 TOALETNA I TUŠ STOLICA/KOLICA





UPUTE ZA KORIŠTENJE

Za reklamacije obratite se na:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr

SKU: RP780 i RP782

1. UVOD
Hvala što ste odabrali pomoćni uređaj iz Morettijeve linije MOPEDIA. Moretti multifunkcionalne kupaonske sjedalice dizajnirane su i proizvedene kako bi zadovoljile sve vaše potrebe za praktičnom, ispravnom i sigurnom uporabom. Ovaj priručnik sadrži male savjete za pravilnu uporabu uređaja koji ste odabrali i vrijedne savjete za vašu sigurnost. Preporučljivo je pažljivo pročitati cijeli ovaj priručnik prije uporabe uređaja. Ako imate bilo kakvih nedoumica, obratite se prodavaču koji će vam moći pomoći i pravilno vas savjetovati.

2. NAMJENA
MOPEDIA višenamjenske stolice za kupaonicu marke Moretti služe kao pomoć pri tuširanju i kupanju te su prikladne za osobe s poteškoćama pri hodanju. One uključuju četiri funkcije u jednoj: stabilizirajuću dasku za WC školjku, stalak za WC školjku, udobnu sjedalicu i dasku za tuširanje.

PAŽNJA!
- Zabranjena je uporaba sljedećeg uređaja u druge svrhe osim definiranih u ovom priručniku.
- Moretti S.p.A. odbija bilo kakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnom uporabom uređaja ili od uporabe koja nije navedena u ovom priručniku
- Proizvođač zadržava pravo izmjene uređaja i sljedećeg priručnika bez prethodne najave kako bi se poboljšale njegove karakteristike

3. OPĆA UPOZORENJA
- Za pravilnu uporabu uređaja pogledajte ovaj priručnik
- Po potrebi posavjetujte se s liječnikom ili terapeutom radi utvrđivanja ispravne prilagodbe i ispravne uporabe uređaja
- Držite komplet dalje od izvora topline
- Vijek trajanja uređaja određen je trošenjem dijelova koji se ne mogu popraviti i/ili zamijeniti
- NE dopustite djeci da se igraju sa stolcem

4. OPĆI OPIS
4.1 Višenamjenske sjedalice za kupaonicu
RP780 Fiksni model
RP782 Sklopivi model na kotačima
MOPEDIA višenamjenske sjedalice za kupaonicu izrađene su od eloksiranog aluminija, s udobnom PVC stolicom i protukliznim gumenim vrhovima (s izuzetkom modela RP782 opremljenog zakretnim kotačima). Namjestivo po visini svakih 2,5 cm. One uključuju četiri funkcije u jednoj: stabilizirajuću dasku za WC školjku, stalak za WC školjku, udobnu sjedalicu i dasku za tuširanje.

5. PRIJE SVAKE UPORABE
- Uvijek provjerite stanje istrošenosti dijelova na način koji osigurava pravilnu uporabu i sigurnost osoba i stvari
- Provjerite je li sigurnosni gumb pravilno umetnut u otvor za podešavanje visine, kao i sve sklopove

6. PRIJE SASTAVLJANJA
Raspakirajte proizvod i provjerite da nije oštećen tijekom prijevoza. U slučaju da je proizvod oštećen, obratite se prodavaču.

7. MONTAŽA
RP780 Umetnite stalak za WC školjku u isporučeni proizvod koji je već sastavljen, vodeći računa da pravilno postavite stalak sa stražnjom vodoravnom šipkom.

RP782 Raširite bočne dijelove konstrukcije podignite dio s već montiranim toaletnim stalkom i pričvrstite dva kraja na bočne strane. Umetnite stalak za WC školjku, pazeći da pravilno postavite stalak sa stražnjom vodoravnom šipkom.

8. SJEDALICA



Pritisnite sigurnosni gumb za podešavanje visine sjedalica uklanjanjem unutarnjeg dijela noge i dovođenjem do otvora prema željenoj visini. Provjerite jesu li sve četiri noge postavljene na istu visinu.

9. UPOZORENJA ZA UPORABU

- Oprezno upotrebljavajte na mokrim i skliskim površinama
- Nemojte prekoračiti maksimalnu težinu pacijenta navedenu na naljepnici proizvoda i u poglavlju tehničke karakteristike ovog priručnika
- Sjedalo se može koristiti samo na čvrstoj, ravnoj površini. Nemojte koristiti sjedalo na stepenicama ili nagibima
- Nemojte koristiti stolac na način koji nije naveden u ovim uputama za uporabu. Svaka odgovornost za nepravilnu uporabu stolice se odbacuje
- Izbjegavajte ostavljanje stolca vani i u dodiru s vodom na duže vrijeme
- Povremeno provjeravajte stabilnost i čvrstoću proizvoda, kao i stanje potpornih vrhova ili kotača. Zamijenite ih kada su istrošeni
- Ako ste u nedoumici u vezi s uporabom, postavljanjem ili održavanjem proizvoda, kontaktirajte trgovca.
- Kako biste izbjegli bilo kakve rizike, držite uređaj izvan dohvata djece

10. UPORABA

- Sjednite i rasporedite težinu po cijelom sjedalu. Nemojte sjediti i gurati u stranu
- Uvijek se naslonite na oba naslona za ruke kako biste se ustali i uravnotežili
- U slučaju korištenja stolice od strane osoba s posebnim motoričkim poteškoćama, uvijek im pomognite da sjednu i ustanu sa stolice

11. ODRŽAVANJE

Uređaji linije MOPEDIA pažljivo se provjeravaju i označavaju oznakom CE u trenutku stavljanja na tržište. Radi sigurnosti pacijenta i liječnika, preporučuje se da ovlaštena osoba provjeri prikladnost za uporabu

PAŽNJA!
Ne pomičite pomagalo dok je pacijent u sjedećem položaju

vašeg proizvoda, najmanje svake 2 godine. Pod periodičnim pregledom podrazumijeva se pregled sljedećih dijelova:

- Potporna konstrukcija stolice i spojni dijelovi
- Provjerite sastavljanje i rad kotača s njihovom kočnicom (kod modela sa kotačima)
- Provjerite sve točke zavarivanja
- Provjerite istrošenost vrhova

U slučaju popravka smiju se koristiti samo originalni rezervni dijelovi i pribor.

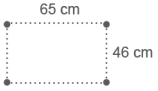
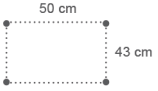
12. ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA

Za čišćenje proizvoda koristite samo krpu natopljenu vodom ili mlakom vodom i neutralnim sapunom i osušite čistom, suhom krpom.

PAŽNJA!
Nemojte koristiti abrazivne tvari, kiseline, alkohol, deterdžente na bazi klora, dezinficijense i aceton, jer te tvari uzrokuju abraziju plastičnih dijelova i hrđanje metalnih površina.

Proizvođač neće biti odgovoran za oštećenja uzrokovana uporabom materijala koji mogu oštetiti površinu proizvoda ili kemijskim korozivnim sredstvima koja se koriste tijekom čišćenja.
Ako je potrebno, dezinficirajte proizvod blagim deterdžentom za dezinfekciju.

13. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Kodovi	Maksimalna nosivost	Visina naslona za ruke	Visina sjedala	Osnovni	Korišteni materijali
RP780	130 kg	Od 66 do 76 cm	Od 45 do 55 cm		Aluminijska cijevna konstrukcija
RP782		Od 64 do 74 cm	Od 47 do 57 cm		

Dimenzije imaju toleranciju od ± 1 cm

14. REZERVNI DIJELOVI I PRIBOR

	**RV7058-4** Sjedalo i poklopac za udobnu sjedalicu RP780 I RP782 Dimenzije otvora: 20,5 x 24 cm		**RV7069-1** Kanta, ručka i poklopac za udobnu sjedalicu RP780 I RP782
	**RV7024** ø 29mm Vrhovi nogu za RP780 (4 komada)		**RV7051** Kotači na zakretanje za RP782 (par)

15. JAMSTVO

Moretti proizvodi imaju jamstvo od grešaka u materijalu ili proizvodnji 2 godine od datuma kupnje, osim mogućih izuzeća ili ograničenja kako slijedi. Jamstvo se ne odnosi na moguća oštećenja uzrokovana nepravilnom uporabom, zlouporabom ili preinakama, a jamstvo neće biti valjano ako se upute za uporabu ne pridržavaju strogo. Ispravna namjena navedena je u ovom priručniku. Moretti nije odgovoran za posljedičnu štetu, tjelesne ozljede ili bilo što uzrokovano ili u vezi s pogrešnom ugradnjom ili nepravilnom uporabom. Moretti jamstvo ne pokriva štete nastale uslijed: prirodne katastrofe, neovlaštenog održavanja ili popravaka, kvarova uzrokovanih problemima s opskrbom električnom energijom (kada je to potrebno), korištenja rezervnih dijelova koje ne pokriva Moretti, nepravilne uporabe, neovlaštenih preinaka, oštećenja prilikom dostave (razlikuje se od originalne Moretti pošiljke) ili u slučaju nedovoljnog održavanja kako je navedeno u priručniku. Jamstvo ne pokriva komponente podložne habanju tijekom ispravne upotrebe uređaja.