HR

MEDICAL DIRECT

PEDALE ZA REHABILITACIJU



UPUTE ZA KORIŠTENJE

SKU: RP922

1. ŠIFRE
RP922 Pedale za rehabilitaciju

2. UVOD
Hvala vam što ste odabrali MOPEDIA sobni bicikl za vježbanje (pedalni trenažer) tvrtke Moretti S.p.A. Ovi uređaji tvrtke Moretti dizajnirani su i izrađeni kako bi zadovoljili sve vaše potrebe za praktičnom, pravilnom i sigurnom uporabom. Ovaj korisnički priručnik sadrži upute za pravilno korištenje uređaja koji ste odabrali, kao i brojne korisne savjete za vašu sigurnost. Molimo vas da prije uporabe uređaja pažljivo pročitate priručnik. U slučaju bilo kakvih pitanja, obratite se svom prodavaču radi savjeta i pomoći.

Napomena: Provjerite jesu li svi dijelovi proizvoda neoštećeni nakon isporuke. Ako uočite oštećenja, nemojte koristiti proizvod i obratite se prodavaču radi daljnjih uputa.

UPOZORENJE!
• Nemojte koristiti proizvod u svrhe koje nisu navedene u ovom priručniku.
• Tvrtka Moretti S.p.A. ne snosi nikakvu odgovornost za posljedice proizašle iz nepravilne uporabe ovog proizvoda ili neovlaštenih preinaka na njegovoj konstrukciji.
• Proizvođač zadržava pravo izmjene informacija navedenih u ovom dokumentu bez prethodne najave.

3. NAMJENA
Pedalni trenažer je medicinski proizvod namijenjen osobama s poteškoćama u kretanju, a služi za ponovnu uspostavu koordinacije te mišićne mase ruku i nogu.


4. IZJAVA O SUKLADNOSTI
Moretti S.p.A. izjavljuje, pod svojom isključivom odgovornošću, da je proizvod koji proizvodi i stavlja u promet tvrtka Moretti S.p.A., a koji pripada skupini ŠTAPOVA ZA HODANJE, u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2017/745 o MEDICINSKIM PROIZVODIMA od 5. travnja 2017.
U tu svrhu, Moretti S.p.A. jamči i izjavljuje, pod svojom isključivom odgovornošću, sljedeće:
1. Proizvodi udovoljavaju zahtjevima opće sigurnosti i učinkovitosti propisanim u Prilogu I. Uredbe 2017/745, u skladu s odredbama Priloga IV. navedene Uredbe.
2. Proizvodi NISU MJERNI INSTRUMENTI.
3. Proizvodi NISU NAMIJENJENI ZA KLINIČKA ISPITIVANJA.
4. Proizvodi su pakirani u NESTERILNA PAKIRANJA.
5. Proizvodi pripadaju I. klasi sukladno odredbama Priloga VIII. navedene Uredbe 2017/745.
6. Moretti S.p.A. stavlja na raspolaganje nadležnim tijelima tehničku dokumentaciju kojom se dokazuje sukladnost s Uredbom 2017/745, i to u razdoblju od najmanje 10 godina od proizvodnje posljednje serije.

Napomena: Potpuni kodovi proizvoda, registracijski broj proizvođača (SRN), UDI-DI kod te sve reference na primjenjive propise navedeni su u EU izjavi o sukladnosti koju tvrtka Moretti S.p.A. izdaje i stavlja na raspolaganje putem svojih kanala.

5. OPĆA UPOZORENJA
Prije uporabe uređaja pažljivo PROČITAJTE cijeli priručnik.
• Provjerite je li proizvod isporučen u potpunosti te ga čuvajte zapakiranog, dalje od izvora topline.
• Preporučujemo uporabu isključivo za jednog pacijenta.
• Uređaj se mora dezinficirati prije svake ponovne uporabe.
• VIJEK TRAJANJA: Ograničenje uporabe uređaja određeno je istrošenošću dijelova koji se ne mogu popraviti ili zamijeniti. Vijek trajanja ni u kojem slučaju ne može biti dulji od 10 godina.
• NE dajte djeci da se igraju uređajem ili njime rukuju.
• Korisnik i/ili pacijent dužni su prijaviti svaki ozbiljan štetni događaj povezan s uređajem proizvođaču i nadležnom tijelu države gdje se korisnik i/ili pacijent nalazi.

6. OPĆI OPIS
Svaki sobni bicikl za vježbanje (pedalni trenažer) iz linije CROSSY, proizvođača Mopedia by Moretti, opremljen je četirima protukliznim nožicama, pedalama s podesivim trakama za stopala te ručicom za regulaciju intenziteta.

6.1 Opis dijelova RP922 – CROSSY FIX
Popis dijelova

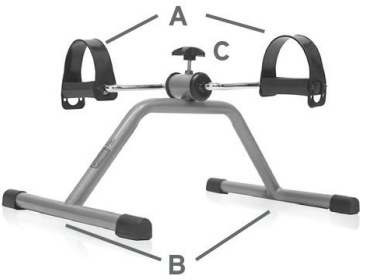

A – Pedale s trakama za stopala
B – Potporne noge s protukliznim završecima
C – Ručica za regulaciju kočnice (intenzitet otpora)

7. PRIJE UPORABE
• Uvijek provjerite istrošenost mehaničkih dijelova kako biste osigurali sigurnu uporabu uređaja, kako za ljude tako i za predmete.
• Provjerite je li uređaj ispravno sastavljen. Posebnu pozornost obratite na fiksiranje pedala i postavljanje nastavaka na potporne noge.
• Provjerite ispravnost rada kočnice koja služi za podešavanje intenziteta napora.

UPOZORENJE!
Prije provođenja bilo kakve rehabilitacijske terapije, uvijek se posavjetujte sa svojim liječnikom ili terapeutom.

7.1 Sastavljanje
Sobni bicikl za vježbanje (pedalni trenažer) isporučuje se potpuno ili djelomično sastavljen, a za njegovo

sastavljanje nisu potrebni vijci ni ključevi. Prije prve uporabe provjerite ima li oštećenih dijelova; ako ih ima, odmah ih zamijenite.



1. Otvorite kutiju i izvadite proizvod;
2. Umetnite ručicu kočnice u predviđeni utor (sl. 1);

8. KAKO KORISTITI

UPOZORENJE!
Ovaj uređaj za vježbanje (pedalni trenažer) zahtijeva redovito održavanje i svakodnevnu provjeru kako bi ispravno funkcionirao. Preporučujemo da odmah zamijenite istrošene ili oštećene dijelove koji bi mogli uzrokovati ozljede korisnika. Preporučuje se da stručna osoba pokaže kako se uređaj koristi te da korisnik ponovi postupak pod njezinim nadzorom. Za pravilnu rehabilitaciju nužno je održavati pravilan položaj tijela. Prije početka vježbanja posavjetujte se sa svojim liječnikom ili terapeutom.

• Prije uporabe provjerite jesu li svi vijci potpuno zategnuti;
• Postavite uređaj stabilno na ravnu površinu;
• Položaj uređaja u odnosu na visinu sjedala mora omogućiti potpuno ispružanje noge, a da pritom nije potrebno naginjati zdjelicu udesno ili ulijevo;
• Započnite s vježbanjem tek kada vam je trup u gotovo uspravnom položaju;
• Kako bi se rehabilitacija provodila postupno, uređaj je opremljen kočnicom za podešavanje intenziteta otpora;
• Ne skidajte stopala s pedala dok je uređaj u funkciji;
• Nakon završetka uporabe, okrenite ručicu za podešavanje kočnice u smjeru kazaljke na satu kako biste povećali otpor i spriječili slobodno okretanje pedala, što bi moglo dovesti do ozljeda.

UPOZORENJE!
Nepridržavanje navedenih preporuka može dovesti do ozljeda ili ozbiljnih zdravstvenih problema.

10.1 Uporaba za noge

1. Postavite uređaj na ravnu površinu koja nije skliska;
2. Sjednite ispred uređaja na udaljenosti koja omogućuje jednostavno postavljanje stopala na pedale. Uvijek postavite desno stopalo na pedalu označenu slovom „R", a lijevo stopalo na pedalu označenu slovom „L".
3. Po potrebi prilagodite trake za stopala;
4. Podesite otpor kočnice prema preporukama liječnika ili terapeuta.

Napomena: Za povećanje intenziteta otpora okrenite ručicu kočnice u smjeru kazaljke na satu. Za smanjenje intenziteta okrenite je u suprotnom smjeru (suprotno od kazaljke na satu).
5. Pokrenite uređaj kružnim pokretima.

10.2 Uporaba za ruke

1. Postavite uređaj na ravnu površinu koja nije skliska;
2. Sjednite ispred uređaja na udaljenosti koja omogućuje jednostavno postavljanje stopala na pedale. Desno stopalo uvijek postavite na pedalu označenu slovom „R", a lijevo stopalo na pedalu označenu slovom „L".
3. Podesite otpor kočnice u skladu s preporukama svog liječnika ili terapeuta.

Napomena: Za povećanje intenziteta napora okrenite ručicu kočnice u smjeru kazaljke na satu. Za smanjenje intenziteta okrenite je u suprotnom smjeru od kazaljke na satu.
4. Čvrsto uhvatite pedale rukama i pokrenite uređaj izvodeći kružne pokrete.

9. ČIŠĆENJE

9.1 Čišćenje

Za uklanjanje prašine koristite samo vlažnu krpu, a za tvrdokorniju prljavštinu koristite vlažnu krpu s blagim sapunom. Prije upotrebe temeljito osušite. Nikada ne koristite vodu temperature iznad 30°C. Nikada ne koristite mlaz vode ili perilicu rublja na paru.

UPOZORENJE!
Prilikom čišćenja nemojte koristiti abrazivne tvari, kiseline, alkohol, sredstva za čišćenje na bazi klora, dezinficijense i aceton, jer te tvari uzrokuju abraziju plastičnih površina i hrđanje metalnih površina.

9.2 Dezinfekcija

Ako trebate dezinficirati proizvod, koristite uobičajeno sredstvo za dezinfekciju.

UPOZORENJE!
Nikada ne koristite kiseline, lužine ili otapala poput acetona

10. JAMSTVO

Moretti proizvodi imaju jamstvo od grešaka u materijalu ili proizvodnji 2 godine od datuma kupnje, osim mogućih izuzeća ili ograničenja kako slijedi. Jamstvo se ne odnosi na moguća oštećenja uzrokovana nepravilnom uporabom, zlouporabom ili preinakama, a jamstvo neće biti valjano ako se upute za uporabu ne pridržavaju strogo. Ispravna namjena navedena je u ovom priručniku. Moretti nije odgovoran za posljedičnu štetu, tjelesne ozljede ili bilo što uzrokovano ili u vezi s pogrešnom ugradnjom ili nepravilnom uporabom. Moretti jamstvo ne pokriva štete nastale uslijed: prirodne katastrofe, neovlaštenog održavanja ili popravaka, kvarova uzrokovanih problemima s opskrbom električnom energijom (kada je to potrebno), korištenja rezervnih dijelova koje ne pokriva Moretti, nepravilne uporabe, neovlaštenih preinaka, oštećenja prilikom dostave (razlikuje se od originalne Moretti pošiljke) ili u slučaju nedovoljnog održavanja kako je navedeno u priručniku. Jamstvo ne pokriva komponente podložne habanju tijekom ispravne upotrebe uređaja.

11. POPRAVCI

11.1 Popravak u jamstvu

Jamstveni popravci: U slučaju da se na proizvodu marke Moretti tijekom jamstvenog roka pojavi kvar uzrokovan nedostatkom u materijalu ili greškom u proizvodnji, tvrtka Moretti provjerit će s kupcem je li taj kvar pokriven jamstvom. Moretti, prema vlastitoj procjeni, može popraviti ili zamijeniti proizvod pod jamstvom, bilo kod ovlaštenog distributera ili u prostorima tvrtke Moretti. Trošak rada za popravak snosi tvrtka Moretti ako je popravak pokriven jamstvom. Popravak ili zamjena ne dovode do obnove niti produljenja jamstvenog roka.

Popravci koji nisu pokriveni jamstvom: Proizvod koji nije pokriven jamstvom može se poslati na popravak isključivo uz prethodno odobrenje korisničke službe tvrtke Moretti. Troškove rada i dostave za popravke koji nisu pokriveni jamstvom u potpunosti snosi kupac ili distributer. Na popravke proizvoda koji nisu pokriveni jamstvom daje se jamstvo u trajanju od šest (6) mjeseci, računajući od datuma primitka popravljenog proizvoda.

Uređaji bez nedostataka: Ako nakon pregleda i testiranja vraćenog proizvoda tvrtka Moretti utvrdi da proizvod nije neispravan, o tome će obavijestiti kupca. U tom slučaju proizvod će biti vraćen kupcu, a sve troškove dostave snosi kupac.

11.2 Popravak izvan jamstva

Za originalne rezervne dijelove Moretti vrijedi jamstvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci od datuma primitka.

11.3 Proizvod bez nedostataka

Osim ako nije izričito navedeno u ovom jamstvu i u skladu s važećim zakonskim propisima, Moretti ne daje nikakve izjave, jamstva ni uvjete, bilo izričite ili podrazumijevane, uključujući izjave, jamstva ili uvjete koji se odnose na tržišnu prikladnost, prikladnost za određenu namjenu, nekršenje prava trećih strana ili nesmetano korištenje. Moretti ne jamči da će korištenje proizvoda Moretti biti neprekinuto ili bez pogrešaka. Trajanje svih podrazumijevanih jamstava koja mogu biti propisana zakonom ograničeno je na razdoblje trajanja jamstva, u skladu s važećim zakonskim propisima. Neke države ne dopuštaju ograničenja trajanja podrazumijevanih jamstava niti isključenje ili ograničenje odgovornosti za slučajne ili posljedične štete u vezi s potrošačkim proizvodima. U takvim državama ili zemljama određena odricanja i ograničenja navedena u ovom jamstvu možda se na vas neće primjenjivati. Ovo jamstvo podložno je promjenama bez prethodne obavijesti.