HR

MEDICAL DIRECT

STOLAC ZA TUŠIRANJE







UPUTE ZA KORIŠTENJE

SKU: RS810, RS815 i RS817

1. ŠIFRE
RS810 Plastična klupa za kadu
RS815 Sklopivi stolac za tuširanje
RS817 Okrugli stolac za tuširanje

2. UVOD
Hvala vam što ste kupili proizvod iz asortimana MOPEDIA tvrtke Moretti S.p.A., namijenjenog za upotrebu u kupaonici. Ovaj korisnički priručnik sadrži upute za pravilnu upotrebu odabranog proizvoda, kao i korisne savjete za vašu sigurnost. Molimo vas da prije upotrebe proizvoda pažljivo pročitate priručnik. Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite se svom prodavaču radi savjeta i pomoći. U slučaju nedoumica, preporučujemo da kontaktirate prodavača koji će vam moći pružiti potrebnu pomoć i savjet.

NAPOMENA: Prije upotrebe provjerite ima li na proizvodu oštećenja nastalih tijekom transporta i testirajte ga. Ako uočite oštećenje, nemojte koristiti proizvod. Za daljnje upute obratite se svom prodavaču.

3. NAMJENA
Stolica za kadu tvrtke Moretti namijenjena je kao pomagalo osobama s invaliditetom pri korištenju kade.

OPREZ!
• Ne koristite proizvod u svrhe koje nisu navedene u ovom priručniku.
• Moretti S.p.A. ne snosi nikakvu odgovornost za posljedice proizašle iz nepravilne uporabe ovog proizvoda ili neovlaštenih preinaka na njegovoj konstrukciji.
• Proizvođač zadržava pravo izmjene informacija sadržanih u ovom dokumentu bez prethodne najave.

4. IZJAVA O SUKLADNOSTI
Moretti S.p.A. izjavljuje, pod svojom isključivom odgovornošću, da je proizvod koji proizvodi i stavlja u promet tvrtka Moretti S.p.A., a koji pripada skupini ŠTAPOVA ZA HODANJE, u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2017/745 o MEDICINSKIM PROIZVODIMA od 5. travnja 2017.
U tu svrhu, Moretti S.p.A. jamči i izjavljuje, pod svojom isključivom odgovornošću, sljedeće:
1. Proizvodi udovoljavaju zahtjevima opće sigurnosti i učinkovitosti propisanim u Prilogu I. Uredbe 2017/745, u skladu s odredbama Priloga IV. navedene Uredbe.
2. Proizvodi NISU MJERNI INSTRUMENTI.
3. Proizvodi NISU NAMIJENJENI ZA KLINIČKA ISPITIVANJA.
4. Proizvodi su pakirani u NESTERILNA PAKIRANJA.
5. Proizvodi pripadaju I. klasi sukladno odredbama Priloga VIII. navedene Uredbe 2017/745.
6. Moretti S.p.A. stavlja na raspolaganje nadležnim tijelima tehničku dokumentaciju kojom se dokazuje sukladnost s Uredbom 2017/745, i to u razdoblju od najmanje 10 godina od proizvodnje posljednje serije.

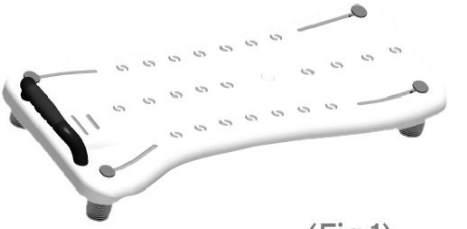
Napomena: Potpuni kodovi proizvoda, registracijski broj proizvođača (SRN), UDI-DI kod te sve reference na primjenjive propise navedeni su u EU izjavi o sukladnosti koju tvrtka Moretti S.p.A. izdaje i stavlja na raspolaganje putem svojih kanala.

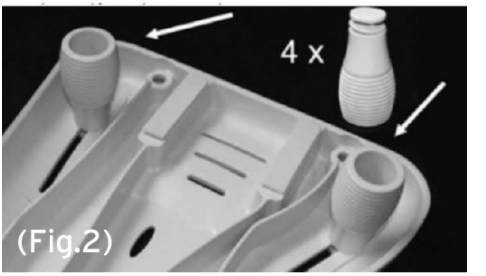
5. OPĆA UPOZORENJA
Prije uporabe uređaja pažljivo PROČITAJTE cijeli priručnik.
• Provjerite je li proizvod isporučen u potpunosti te ga čuvajte zapakiranog, dalje od izvora topline.
• Preporučujemo uporabu isključivo za jednog pacijenta.
• Uređaj se mora dezinficirati prije svake ponovne uporabe.
• VIJEK TRAJANJA: Ograničenje uporabe uređaja određeno je istrošenošću dijelova koji se ne mogu popraviti ili zamijeniti. Vijek trajanja ni u kojem slučaju ne može biti dulji od 10 godina.
• NE dajte djeci da se igraju uređajem ili njime rukuju.
• Korisnik i/ili pacijent dužni su prijaviti svaki ozbiljan štetni događaj povezan s uređajem proizvođaču i nadležnom tijelu države gdje se korisnik i/ili pacijent nalazi.

6. OPĆI OPIS
6.1 RS810
Plastično sjedalo za kadu s protukliznom plastičnom ručkom i otvorima za otjecanje vode. Podesiva širina za bolju prilagodljivost.

6.2 RS815
Sklopiva stolica za kadu s konstrukcijom od lakiranog čelika i plastičnim sjedalom; može se sklopiti radi uštede prostora pri pohrani. Protuklizni gumeni završeci na nogama.

6.3 RS817
Okruglo sjedalo za kadu. S okvirom od eloksiranog aluminija.

7. SASTAVLJANJE/RASTAVLJANJE
7.1 RS810

(Fig.1)



(Fig.2)

Proizvod se isporučuje nesastavljen, a sastavljanje je jednostavno i ne zahtijeva nikakav alat.
Sastoji se od:

- Sjedala (1 kom.)
- Graničnika (4 kom.)
- Ručke (1 kom.)
- Vijaka

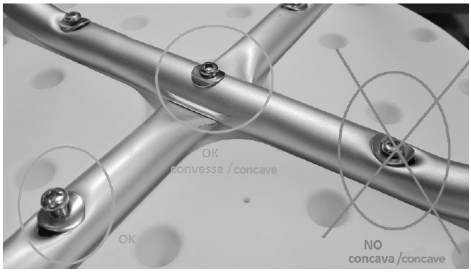
Uvrnite četiri velika plastična vijka na donju stranu sjedala. Dobro ih zategnite odvijačem ili manjim novčićem. Za postavljanje ručke, okrenite sjedalo tako da graničnici budu okrenuti prema dolje, a zatim umetnite ručku u otvore na krajevima sjedala. Ručka treba biti okrenuta prema sredini sjedala. (Sl. 1)

• Okrenite sjedalo i otpustite 4 vijka kako bi se mogli pomicati.
• Pomaknite 4 vijka prema sredini sjedala kako bi se ono moglo lako prilagoditi kadi.
• Ponovno okrenite sjedalo i postavite ga u kadu tako da ručka bude okrenuta prema zidu.
(Ručka se uvijek mora nalaziti na strani zida.)
• Postavite sjedalo za kadu u najprikladniji položaj.
• Pomaknite graničnike tako da dodiruju unutarnju stijenku kade, a zatim zategnite vijke.
• Okrenite sjedalo tako da graničnici budu okrenuti prema gore i pomaknite ih prema van za otprilike 2 mm na svakom graničniku. Zatim zategnite nosače kako se ne bi lako pomicali.
• Postavite sjedalo u kadu i lagano ga pritisnite prema dolje (nemojte primjenjivati silu). Ako sjedalo klizi po kadi, možda ćete morati dodatno pomaknuti oslonce prema van. U tom slučaju ponovite korake od 2 do 7.

7.2 RS815

Proizvod se isporučuje sastavljen.

7.3 RS817



Proizvod se isporučuje nesastavljen, a sastavljanje je jednostavno. U pakiranju ćete pronaći:
- Okruglo sjedalo s okvirom (1 kom.)
- Noge (4 kom.)

8. KAKO KORISTITI

8.1 RS810

• Postavite sjedalicu u kadu i zategnite čepove kako bi bila stabilna
• Stavite ručku na stranu suprotnu od točke pristupa kadi
• Ako je potrebno, pomozite pacijentu da sjedne na sjedalo
• Koristite ručku kao pomoć pri pomicanju i pravilnom položaju u sjedalu

8.2 RS815

Postavite sjedalicu i otvorite je na glatkoj, ravnoj površini. Prije uporabe provjerite stabilnost sjedalice.

8.3 RS817

Podešavanje visine

Pritisnite zatik kako biste podesili sjedalo; izvucite šipku i umetnite je u otvore na željenoj visini, vodeći pritom računa o tome što je najpraktičnije za pacijenta. Vratite zatik u otvor kako biste fiksirali položaj. Provjerite jesu li sve četiri noge jednake visine. Postavite sjedalo na ravnu i vodoravnu površinu. Prije uporabe provjerite stabilnost sjedala.

9. ČIŠĆENJE

9.1 Čišćenje

Za uklanjanje prašine koristite samo vlažnu krpu, a za tvrdokorniju prljavštinu koristite vlažnu krpu s blagim sapunom. Prije upotrebe temeljito osušite. Nikada ne koristite vodu temperature iznad 30°C. Nikada ne koristite mlaz vode ili perilicu rublja na paru.

UPOZORENJE!

Prilikom čišćenja nemojte koristiti abrazivne tvari, kiseline, alkohol, sredstva za čišćenje na bazi klora, dezinficijense i aceton, jer te tvari uzrokuju abraziju plastičnih površina i hrđanje metalnih površina.

9.2 Dezinfekcija

Ako trebate dezinficirati proizvod, koristite uobičajeno sredstvo za dezinfekciju.

UPOZORENJE!

Nikada ne koristite kiseline, lužine ili otapala poput acetona

10. JAMSTVO

Moretti proizvodi imaju jamstvo od grešaka u materijalu ili proizvodnji 2 godine od datuma kupnje, osim mogućih izuzeća ili ograničenja kako slijedi. Jamstvo se ne odnosi na moguća oštećenja uzrokovana nepravilnom uporabom, zlouporabom ili preinakama, a jamstvo neće biti valjano ako se upute za uporabu ne pridržavaju strogo. Ispravna namjena navedena je u ovom priručniku. Moretti nije odgovoran za posljedičnu štetu, tjelesne ozljede ili bilo što uzrokovano ili u vezi s pogrešnom ugradnjom ili nepravilnom uporabom. Moretti jamstvo ne pokriva štete nastale uslijed: prirodne katastrofe, neovlaštenog održavanja ili popravaka, kvarova uzrokovanih problemima s opskrbom električnom energijom (kada je to potrebno), korištenja rezervnih dijelova koje ne pokriva Moretti, nepravilne uporabe, neovlaštenih preinaka, oštećenja prilikom dostave (razlikuje se od originalne Moretti pošiljke) ili u slučaju nedovoljnog održavanja kako je navedeno u priručniku. Jamstvo ne pokriva komponente podložne habanju tijekom ispravne upotrebe uređaja.

11. POPRAVCI

11.1 Popravak u jamstvu

Jamstveni popravci: U slučaju da se na proizvodu marke Moretti tijekom jamstvenog roka pojavi kvar uzrokovan nedostatkom u materijalu ili greškom u proizvodnji, tvrtka Moretti provjerit će s kupcem je li taj kvar pokriven jamstvom. Moretti, prema vlastitoj procjeni, može popraviti ili zamijeniti proizvod pod jamstvom, bilo kod ovlaštenog distributera ili u prostorima tvrtke Moretti. Trošak rada za popravak snosi tvrtka Moretti ako je popravak pokriven jamstvom. Popravak ili zamjena ne dovode do obnove niti produljenja jamstvenog roka.

Popravci koji nisu pokriveni jamstvom: Proizvod koji nije pokriven jamstvom može se poslati na popravak isključivo uz prethodno odobrenje korisničke službe tvrtke Moretti. Troškove rada i dostave za popravke koji nisu pokriveni jamstvom u potpunosti snosi kupac ili distributer. Na popravke proizvoda koji nisu pokriveni jamstvom daje se jamstvo u trajanju od šest (6) mjeseci, računajući od datuma primitka popravljenog proizvoda.

Uređaji bez nedostataka: Ako nakon pregleda i testiranja vraćenog proizvoda tvrtka Moretti utvrdi da proizvod nije neispravan, o tome će obavijestiti kupca. U tom slučaju proizvod će biti vraćen kupcu, a sve troškove dostave snosi kupac.

11.2 Popravak izvan jamstva

Za originalne rezervne dijelove Moretti vrijedi jamstvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci od datuma primitka.

11.3 Proizvod bez nedostataka

Osim ako nije izričito navedeno u ovom jamstvu i u skladu s važećim zakonskim propisima, Moretti ne daje nikakve izjave, jamstva ni uvjete, bilo izričite ili podrazumijevane, uključujući izjave, jamstva ili uvjete koji se odnose na tržišnu prikladnost, prikladnost za određenu namjenu, nekršenje prava trećih strana ili nesmetano korištenje. Moretti ne jamči da će korištenje proizvoda Moretti biti neprekinuto ili bez pogrešaka. Trajanje svih podrazumijevanih jamstava koja mogu biti propisana zakonom ograničeno je na razdoblje trajanja jamstva, u skladu s važećim zakonskim propisima. Neke države ne dopuštaju ograničenja trajanja podrazumijevanih jamstava niti isključenje ili ograničenje odgovornosti za slučajne ili posljedične štete u vezi s potrošačkim proizvodima. U takvim državama ili zemljama određena odricanja i ograničenja navedena u ovom jamstvu možda se na vas neće primjenjivati. Ovo jamstvo podložno je promjenama bez prethodne obavijesti.